

seca

seca 220

Θερμά συγχαρητήρια

Με τον μετρητή seca 220 έχετε αποκτήσει μία συσκευή μέτρησης ύψους για παιδιά και ενήλικες ακριβείας και ταυτόχρονα σταθερή.

Ο μετρητής είναι κατασκευασμένος από σταθερές και εύκολες στον καθαρισμό πλάκες αλουμινίου. Ο δείκτης μέτρησης είναι κατασκευασμένος από πλαστικό και είναι πτυσσόμενος.

Ο μετρητής seca 220 χρησιμοποιείται στη μέτρηση μήκους/ύψους και συντελεί στην διάγνωση της υγείας του ασθενούς καθώς επίσης και στη διαπίστωση και παρακολούθηση ενοχλήσεων στη διατροφή ή στη λειτουργία του οργανισμού.

Είναι προσαρτημένος μαζί με τα υλικά μονταρίσματος στο στύλο των ζυγαριών με στύλους seca.

Ο μετρητής αυτός συνδέεται με μία ζυγαριά και το όλο σύστημα αποτελεί έναν ολοκληρωμένο σταθμό μέτρησης ύψους και βάρους.

Ο μετρητής seca 220 μαζί με μία ζυγαριά με στύλους αποτελεί κατά κύριο λόγο μια συσκευή ιδανική για τα νοσοκομεία, τα ιατρεία και τους σταθμούς ιδρυμάτων μέτρησης και περιθαλ΄ης.

Ασφάλεια


Πριν χρησιμοποιήσετε τον νέο μετρητή, διαθέστε λίγο χρόνο για να δια΄σετε τις ακόλουθες οδηγίες ασφάλειας.

- Τηρείτε τις υποδείξεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

- Προσαρτήστε τον μετρητή μόνο στις ζυγαριές με στύλους seca.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα υλικά μονταρίσματος που βρίσκονται στη συσκευασία.
- Κατά το μοντάρισμα προσέξτε να είναι οι βίδες σταθερά βιδωμένες και ακολουθήστε τον σωστό τρόπο μονταρίσματος (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο οδηγίες μονταρίσματος)
- Διπλώστε προς τα κάτω τον μοχλό του δείκτη μέτρησης για να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Οδηγίες εγκατάστασης

Στερέωση στάνταρτ ...

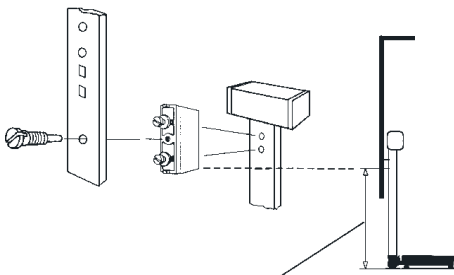

Ζυγαριά



seca 709, 710:
seca 709f, 710f:
υπόλοιπες

Μέτρο ελέγχου

685 mm
700 mm
670 mm


Η απόσταση μεταξύ δαπέδου και κάτω ακμής του στηρίγματος πρέπει να συμφωνεί με το μέτρο ελέγχου.

Ειδικές στερεώσεις...

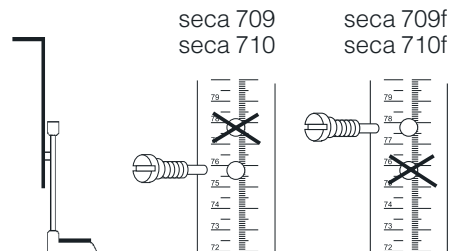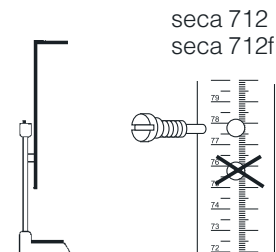

Μέτρηση ελέγχου

... Κρατήστε ένα μέτρο στη ράβδο μέτρησης seca και μετρήστε το ύψος πάνω από το βαθύρα.

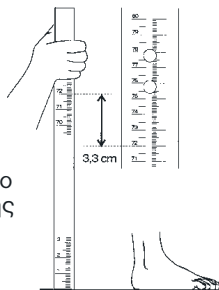


Η ράβδος μέτρησης seca είναι στερεωμένη σωστά ...

- εάν η κλίμακα της ράβδου μέτρησης έχει μετατοπιστεί κατά 3,3 cm προς τα κάτω. Τότε π.χ. ένα ύψος 72 cm πρέπει να αναγνωσθεί από τη ράβδο μέτρησης seca ως τιμή 75,3 cm.

Χειρισμός

Ετσι κάνω σωστές μετρήσεις

1. Τοποθετήστε τον δείκτη μετρήσεως σε οριζόντια θέση μέχρι να μαγκώσει.

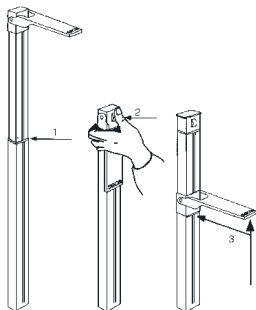

2. Μετακινήστε τον δείκτη μετρήσεως ανάλογα με το ύψος του ατόμου που βρίσκεται προς μέτρηση.
 - 2a. Για μετρήσεις από 130, 5 cm μέχρι 200 cm
 - Σήμα αναγνώσεως (1)
 - 2β. Για μετρήσεις κάτω των 130, 5 cm:
 - Λύστε την ασφάλιση (2) με πίεση
 - Μετακινήστε τον δείκτη μετρήσεως προς τα κάτω
 - Σήμα αναγνώσεως (3)
3. Το άτομο που βρίσκεται προς μέτρηση τοποθετείται κάτω από τον δείκτη μετρήσεως. Πλάτες και κεφάλι πρέπει να βρίσκονται σε όρθια θέση.
4. Μετακινήστε τον μοχλό μέτρησης πάνω στο κεφάλι, έτσι ώστε ο δείκτης μετρήσεως να βρίσκεται σε κανονική θέση χωρίς να λυγίζει.
5. Διαβάστε το ύψος του σώματος στο σήμα αναγνώσεως. Αν ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα τότε θα επιτευχθεί καλύτερα ακρίβεια +/- 5 mm.

Καθαρισμός

Μπορείτε να καθαρίζετε τον μετρητή, αν υπάρχει ανάγκη, με ένα απορρυπαντικό οικιακής χρήσης ή με ένα κοινό μέσο απολύμανσης που θα βρείτε στο εμπόριο. Προσέξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τεχνικά στοιχεία

Τομέας
μέτρησης:

60-200 cm /
24-78 ίντσες

Κλίμακα:
Διαστάσεις
(ΠxΥxB):

1 mm / 1/8 ίντσες
55 x 784 x 34 mm

Βάρος:

περ. 700 g

Τομέας

θερμοκρασίας:

+10 °C έως +40 °C

Ιατρικό προϊόν

σύμφωνα με την

Οδηγία 93/42/EOK:

Κατηγορία I

Απόσυρση

Αν ο μετρητής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιά, τότε ο σύνδεσμος απόσυρσης αγαθών είναι πρόθυμος να σας δώσει πληροφορίες για τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να λάβετε για την σωστή απόσυρση του μετρητή.

Εγγύηση

Για ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή κατασκευής, ισχύει διετής προθεσμία εγγύησης από την ημερομηνία παράδοσης. Όλα τα κινούμενα εξαρτήματα, όπως π.χ. μπαταρίες, καλώδια, τροφοδοτικά, συσσωρευτές κ.λπ., αποκλείονται από την εγγύηση αυτή. Ελαττώματα, τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση, επιδιορθώνονται δωρεάν για τον πελάτη με προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Περαιτέρω αξιώσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον πελάτη επιβαρύνουν τον πελάτη, εάν η συσκευή βρίσκεται σε άλλο μέρος από την έδρα του πελάτη. Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται στη μεταφορά, μπορεί να εγερθεί εγγυητική αξίωση μόνο εφόσον χρησιμοποιήθηκαν για τις μεταφορές η πλήρης γνήσια συσκευασία και η ζυγαριά ασφαλίθηκε και στερεώθηκε στη συσκευασία όπως κατά τη γνήσια συσκευασία της. Για το λόγο αυτό διαφυλάξτε σε ασφαλή μέρος όλα τα μέρη της συσκευασίας. Δεν υφίσταται εγγυητική αξίωση, εάν η συσκευή ανοιχτεί από άτομα, τα οποία δεν έχουν τη ρητή εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό από την εταιρία seca. Παρακαλούμε τους πελάτες μας στο εξωτερικό, σε περίπτωση εγγυητικής αξίωσης, να απευθυνθούν άμεσα στην αντιπροσωπεία αγοράς της εκάστοτε χώρας.

CE Konformitätserklärung

Mechanisches Längenmessgerät

Modell seca 220

SN : siehe Rückseite Messstab

Der Messstab erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

CE declaration of conformity

Mechanical equipment for measuring length
seca model 220

Serial no.: see back of measuring rod

The measuring rod meets the applicable requirements of Directive 93/42/EEC on medical products.

Certificat de conformité CE

Appareil de mesure à fonctionnement
mécanique

Modèle seca 220

SN : voir au dos de la toise de mesure

La toise de mesure satisfait aux exigences de la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

Declaración de conformidad CE

Equipo mecánico para medición

longitudinal

Modelo seca 220

Nº serie: véase lado trasero de la varilla

La varilla de medición cumple las exigencias legales de la directriz 93/42/CEE sobre productos médicos.

Dichiarazione di conformità CE

Strumento per la misura della statura

Modello seca 220

Nº di serie: v. parte posteriore dell'asta
graduata

L'asta graduata è conforme ai requisiti vigenti della Direttiva 93/42/CEE sui prodotti medicali.

CE-overensstemmelsesattest

Mekanisk længdemåleapparat
model seca 220

SN: se målepindens bagside

Målemåten opfylder de gældende krav fra direktiv 93/42/EØF om medicinprodukter.

CE-Försäkran om överensstämmelse

Mekanisk längdmättningsanordning

Modell seca 220

SN: se mätstavens baksida

Mätstaven uppfyller gällande krav enligt direktiv 93/42/EWG över medicinska produkter.

CE-konformitetserklæring

Mekanisk lengdemåleapparat

Modell seca 220

SN: se bakside målestav

Målestaven oppfyller de gjeldende kravene til direktivet 93/42/EØF til medisinske produkter.

CE-yhdenmukaisuusvakuutus

Mekaaninen pituudenmittauslaite
malli seca 220

SN: ks. mittasauvan takaosaa

Mittasauva täyttää lääketieteellisiä tuotteita koskevan direktiivin 93/42/ETY vaatimukset.

CE-Verklaring van overeenkomst

Mechanische lengtemeter

Model seca 220

SN: zie achterzijde meetlat

De meetlat voldoet aan de geldende eisen van de richtlijn 93/42/EEG inzake medische producten.

Declaração CE de Conformidade

Aparelho mecânico de medição do comprimento

Modelo seca 220

Nº de série: vide retaguarda da vareta de medição

A vareta de medição cumpre os requisitos prescritos pela Directiva do Conselho 93/42/CEE sobre artigos médicos.

CE-Δήλωση Συμβατότητας

Η μηχανική συσκευή μέτρησης μήκους

Μοντέλο seca 220

SN: Βλέπε στην πίσω πλευρά του μετρητή

Ο μετρητής πληρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις του κανονισμού 93/42/EEG όσον αφορά στα ιατρικά προϊόντα.

Vogel & Halke GmbH & Co


Sönke Vogel
– Geschäftsführer –

Hamburg

seca
Medizinische Waagen
und Messsysteme
Vogel & Halke GmbH & Co
Postfach 76 11 80
22061 Hamburg, Germany
Tel +49 40 20 0000 0
Fax +49 40 20 0000 50
<http://www.seca.com>

seca ltd.
Medical Scales and
Measuring Systems
40 Barn Street
Birmingham B5 5QB
England
Tel. +44 121 643 9349
Fax +44 121 633 3403
<http://www.seca.co.uk>

seca sarl
Appareils de Pesée
et de Mesure
Z.I. Champs à la Perdix
21140 Semur-En-Auxois
France
Tél. +33 3 80 97 43 80
Fax +33 3 80 97 43 81
<http://www.secafrance.com>

seca ag
Medizinische Waagen
und Messsysteme
Appareils de Pesée
et de Mesure
Schönmattstrasse 4
CH-4153 Reinach BL 1
Tel. +41 61 711 03 00
Fax +41 61 711 07 04

seca corporation
Medical Scales and
Measuring Systems
1352 Charwood Road
Suite E
Hanover, MD 21076, USA
Tel. +1 410 694 9330
Fax +1 410 694 9680
<http://www.secacorp.com>

