

# FeNOchart™

## Εγχειρίδιο χρήσης



Παγκόσμιοι ηγέτες στην ανάλυση αναπνοής.

## Περιεχόμενα

Καλώς ήρθατε στο FeNOchart™ .....	2
Προβλεπόμενη χρήση .....	2
Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος .....	2
Εγκατάσταση και εγκατάσταση .....	3
Διεπαφή χρήστη .....	5
Λογαριασμοί χρηστών.....	6
Προφίλ ασθενών.....	9
Συγχρονισμός με FeNOchart™ .....	14
Βίντεο με οδηγίες.....	20
Κάνοντας τεστ αναπνοής.....	21
Δημιουργία Αναφορών.....	24
Δοκιμή περιβάλλοντος .....	24
Επιλογές συσκευής.....	24
Ρυθμίσεις λογισμικού .....	25
Επεξήγηση εικονιδίων .....	28

Καλώς ήρθατε στο FeNOchart™

Το FeNOchart™ είναι ένα δωρεάν λογισμικό διαχείρισης ασθενών για χρήση με τη συσκευή NObreath® FeNO. Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού FeNOchart™ και παρέχει έναν οδηγό για το πώς να το κάνετε χρησιμοποιήστε κάθε λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο τεχνικά δεδομένα και κανένα στοιχείο ασθενούς συλλέγονται από το Bedfont®.

### Προβλεπόμενη χρήση

Το FeNOchart™ είναι ένα αυτόνομο κομμάτι λογισμικού, το οποίο χρησιμοποιείται με τη συσκευή NObreath®. Το λογισμικό χρησιμοποιείται ως βοήθημα για τους επαγγελματίες υγείας για την καταγραφή των αποτελεσμάτων FeNO του ασθενούς.

Το λογισμικό FeNOchart™ θα μπορεί να δημιουργήσει ένα γράφημα από τα αποτελέσματα του ασθενούς. Ο επαγγελματίας υγείας θα μπορεί να δημιουργήσει μια αναφορά από τα δεδομένα προφίλ του ασθενούς.

Οι πληροφορίες FeNOchart™ συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων ασθενών και των γραφημάτων θα μπορούν να εξαχθούν σε μορφή PDF.

Το λογισμικό FeNOchart™ μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στο NObreath®.

Προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας σε ιατρικά ιδρύματα.

Συνιστάται η λήψη και η εγκατάσταση αυτού του λογισμικού σε έναν αυτόνομο υπολογιστή, που δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη ασφάλεια των δεδομένων του ασθενούς. Εάν αυτό το λογισμικό θα εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί και ένας λογαριασμός τομέα με ασφαλή κωδικό πρόσβασης για την προστασία των δεδομένων ασθενούς.

### Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος

Λειτουργικό σύστημα:	Windows 7
Επεξεργαστής:	1 GHz
ΕΜΒΟΛΟ:	512 MB

Χώρος στο δίσκο

32-bit: 64-	4,5 GB 4,5 GB USB
-------------	-------------------

bit:	ήBluetooth®
------	-------------


Σύνδεση:

## Εγκατάσταση και Ρύθμιση

Μπορείτε να λάβετε το FeNOchart™ από τη διεύθυνση [www.nobreathfeno.com](http://www.nobreathfeno.com).

Συνιστάται η λήψη και η εγκατάσταση αυτού του λογισμικού σε έναν αυτόνομο υπολογιστή, που δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη ασφάλεια των δεδομένων του ασθενούς. Εάν αυτό το λογισμικό θα εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί τόσο ένας λογαριασμός τομέα όσο και ένας λογαριασμός προϊόντος Bedfont® με ασφαλή κωδικό πρόσβασης για την προστασία των δεδομένων ασθενών.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Μόλις εγκατασταθεί πλήρως το FeNOchart™, θα εμφανιστεί μια προτροπή για τη σύνδεση του NObreath® στον υπολογιστή στην πρώτη περίπτωση.

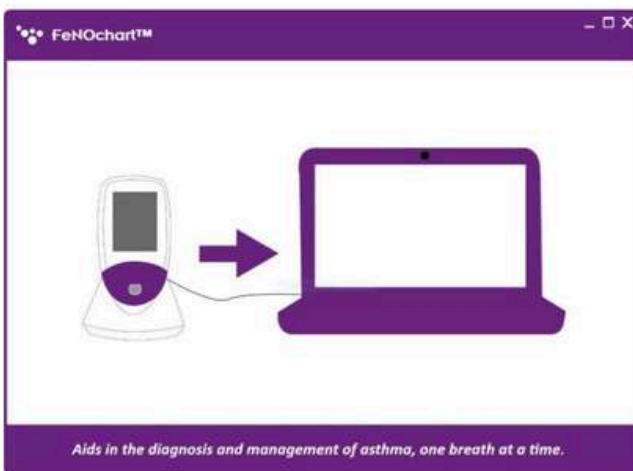

Το FeNOchart™ θα καταχωρήσει τη συνδεδεμένη συσκευή και θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση μόλις συνδεθεί μια συσκευή. Στη συνέχεια, ένα μήνυμα θα ζητήσει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη βάση δεδομένων. Μόλις δημιουργηθεί η βάση δεδομένων, θα γίνει ησελίδα σύνδεσης εμφανιζομαι.



Το FeNOchart™ ρυθμίζεται αυτόματα με λογαριασμό σε επίπεδο διαχειριστή. Συνιστάται να ορίσετε ένα άτομο διαχειριστή για τον πρώτο λογαριασμό, καθώς αυτός ο λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση τυχόν μελλοντικών χρηστών σε περίπτωση που ξεχάσουν τη σύνδεσή τους καθέκαστα.


Ο λογαριασμός σε επίπεδο διαχειριστή έχει προκαθορισμένα στοιχεία σύνδεσης:

Όνομα χρήστη: AdminAdmin  
Κωδικός πρόσβασης: Κωδικός πρόσβασης

Κατά την πρώτη σύνδεση, συνιστάται να αλλάξετε το προκαθορισμένο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και να δώσετε Ζερωτήσεις και απαντήσεις ασφαλείας. Αυτά θα απαιτηθούν για την επαναφορά ενός λογαριασμού εάν ξεχάσετε έναν κωδικό πρόσβασης.


Μόλις ρυθμιστεί ο λογαριασμός σε επίπεδο διαχειριστή, ο διαχειριστής θα μπορεί στη συνέχεια να ρυθμίσει τους άλλους λογαριασμούς χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λογαριασμοί χρηστών» αυτού του εγχειριδίου για περισσότερες πληροφορίες.

## Διεπαφή χρήστη

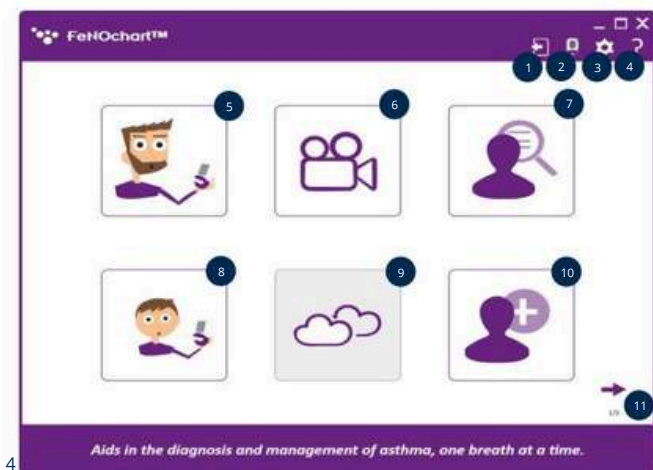

### Αρχική οθόνη

1. Αποσυνδεθείτε
2. Επιλογές NObreath®
3. Ρυθμίσεις
4. Βοήθεια
5. Τεστ αναπνοής ενηλίκων
6. Επίδειξη βίντεο
7. Βάση δεδομένων ασθενών
8. Παιδικό τεστ αναπνοής
9. Δοκιμή περιβάλλοντος (προσεχώς)
10. Προσθέστε έναν νέο ασθενή
11. Επόμενη σελίδα

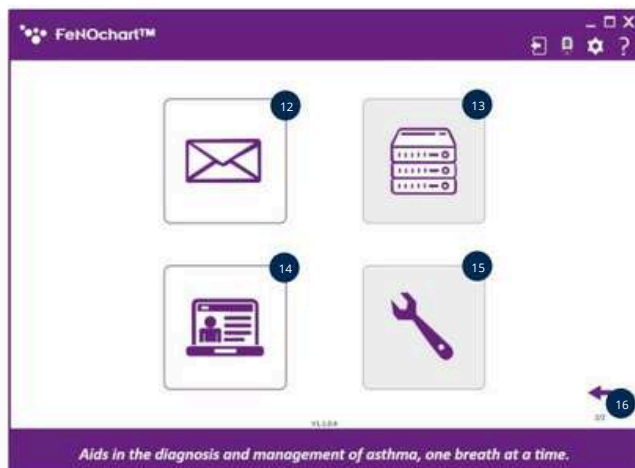

12. Ρυθμίσεις email
13. Ρυθμίσεις διακομιστή (προσεχώς)
14. Πίνακας διαχειριστών
15. Αντιμετώπιση προβλημάτων (προσεχώς)
16. Προηγούμενη σελίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε λογαριασμό επιπέδου χρήστη τον Πίνακα διαχειριστή για επαναφορά ερωτήσεων ασφαλείας ή αλλαγή προνομίων λογαριασμού. μόνο ένας λογαριασμός διαχειριστή μπορεί να έχει πρόσβαση στον πίνακα διαχειριστή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λογαριασμοί επιπέδου χρήστη θα έχουν πρόσβαση μόνο στις ακόλουθες λειτουργίες.

#### Λογαριασμοί χρηστών

Account		
Patient Data	✓	✓
Management	✓	✗

Υπάρχουν 2 τύποι λογαριασμών χρηστών:

1. Επίπεδο διαχειριστή
2. Επίπεδο χρήστη


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο ένας διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει και να διαγράψει λογαριασμούς χρηστών.



### Δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη

Για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό χρήστη, μεταβείτε στον Πίνακα διαχειριστή από τη 2η σελίδα της αρχικής οθόνης. Από εδώ μπορούν να δημιουργηθούν ή να διαγραφούν λογαριασμοί χρηστών και να γίνει επαναφορά των κωδικών πρόσβασης.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο '+' στο κάτω μέρος του οθόνη για να προσθέσετε έναν νέο χρήστη.

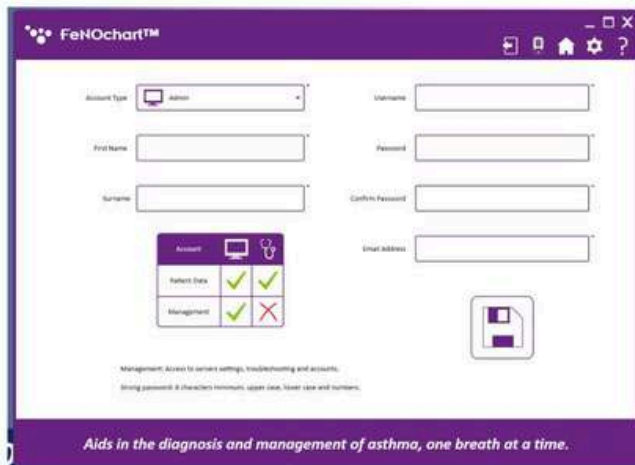

Συμπληρώστε τα στοιχεία που απαιτούνται και κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αποθήκευση».

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα ζητά επιβεβαίωση, κάντε κλικ στο ναι για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη σύνδεση σε νέο λογαριασμό, όλοι οι χρήστες θα πρέπει να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασής τους και να ορίσουν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις ασφαλείας τους.





### Επαναφορά λογαριασμού χρήστη

Όταν ένας χρήστης έχει ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του ή έχει αποκλειστεί από τον λογαριασμό του από αποτυχημένες προσπάθειες ανάκτησης, μόνο ένας διαχειριστής μπορεί να επαναφέρει τον λογαριασμό του. Ο Διαχειριστής Ο πίνακας εμφανίζει την κατάσταση ενός λογαριασμού χρήστη. Το κόκκινο 'X' υποδεικνύει έναν λογαριασμό που χρειάζεται επαναφορά.



Κάνοντας κλικ στο κουμπί επαναφοράς κωδικού πρόσβασης θα δημιουργηθεί μια νέα σύνδεση και ένας νέος κωδικός πρόσβασης για τον χρήστη για πρόσβαση στον λογαριασμό του.



Μόλις ο χρήστης χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που δημιουργήθηκαν για να συνδεθεί και να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασής του, η κατάσταση ανάκτησής του θα επιστρέψει σε πράσινο σημάδι.




### Διαγραφή λογαριασμού χρήστη

Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό χρήστη, επιλέξτε το προφίλ του στον πίνακα διαχειριστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο «Διαγραφή». Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα ζητά επιβεβαίωση. Κάντε κλικ στο ναι για να διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη.

### Προφίλ ασθενών

#### Βάση δεδομένων ασθενών

Το FeNOchart™ έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης στοιχείων ασθενούς, επιτρέποντας την παρακολούθηση των μετρήσεων FeNO ενός ασθενούς με την πάροδο του χρόνου. Από τη βάση δεδομένων, είναι δυνατή η επεξεργασία στοιχείων ασθενούς, η προβολή λίστας ή γραφήματος αποτελεσμάτων, η λήψη και η αποθήκευση μιας δοκιμής απευθείας σε ένα προφίλ και η εξαγωγή αναφορών.

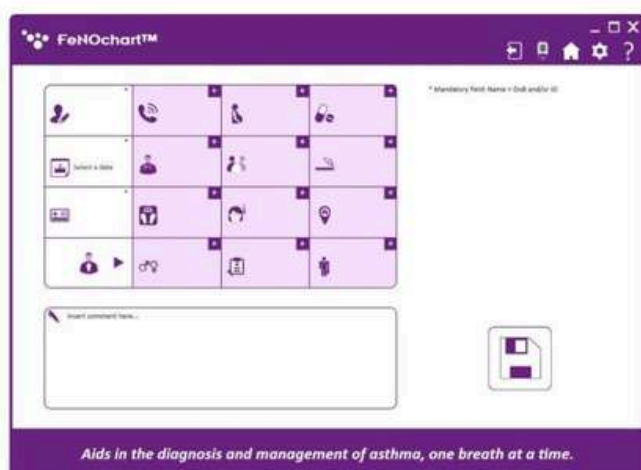


### Προσθήκη προφίλ ασθενούς

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ ασθενούς, κάντε κλικ στο εικονίδιο «Προσθήκη νέου ασθενούς».


Από προεπιλογή, μόνο τα υποχρεωτικά πεδία είναι επεξεργάσιμα. Εάν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες επιθυμείτε, υπάρχουν 2 επιλογές:

1. Μη αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του διάφορα κριτήρια κάνοντας κλικ στο εικονίδιο '+'.
2. Τροποποιήστε τα προεπιλεγμένα κριτήρια στο μενού ρυθμίσεων (δείτε την ενότητα Ασθενής ενότητα Ρυθμίσεις προφίλ αυτού του εγχειριδίου)

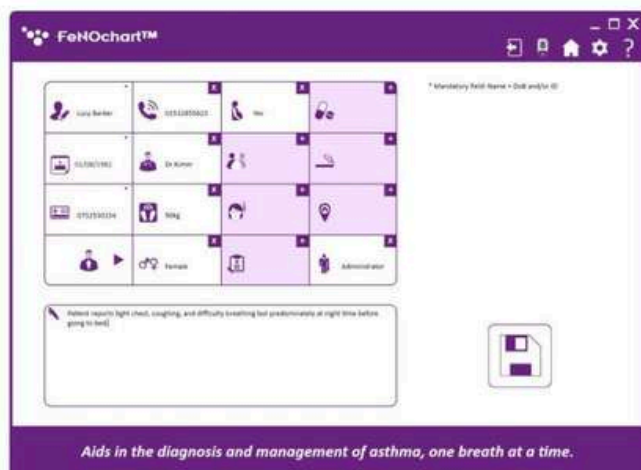


Για να προσθέσετε μη αυτόματα πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στο εικονίδιο '+' στην επάνω δεξιά γωνία του πεδίου κριτηρίων. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το πλαίσιο κριτηρίων θα γίνει λευκό αντί για μοβ και οι πληροφορίες μπορούν να εισαχθούν. Για να απενεργοποιηθεί, κάντε κλικ στο 'x' στην επάνω δεξιά γωνία του πεδίου κριτηρίων.

Εισαγάγετε τα στοιχεία του ασθενούς. υποχρεωτικά πεδία σημειωμένα με \*. Το πεδίο ημερομηνίας γέννησης πρέπει επίσης να είναι πριν από σήμερα, όλα τα άλλα πεδία είναι προαιρετικά.

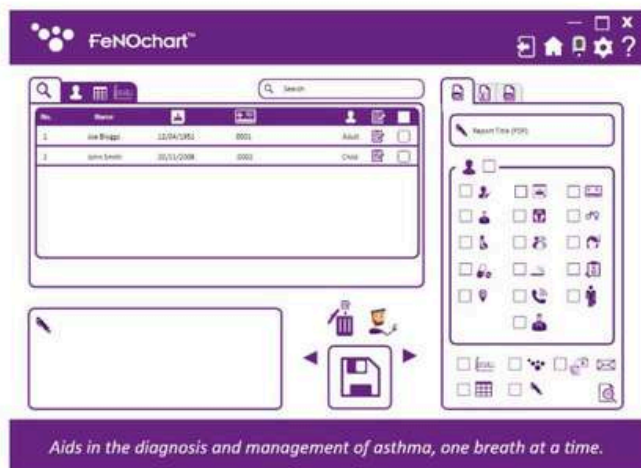


Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε το προφίλ στη βάση δεδομένων FeNOchart™. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα ζητά επιβεβαίωση. Κάντε κλικ στο ναι για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του ασθενούς.

Στη συνέχεια, ο ασθενής μπορεί να βρεθεί στη βάση δεδομένων ασθενών.

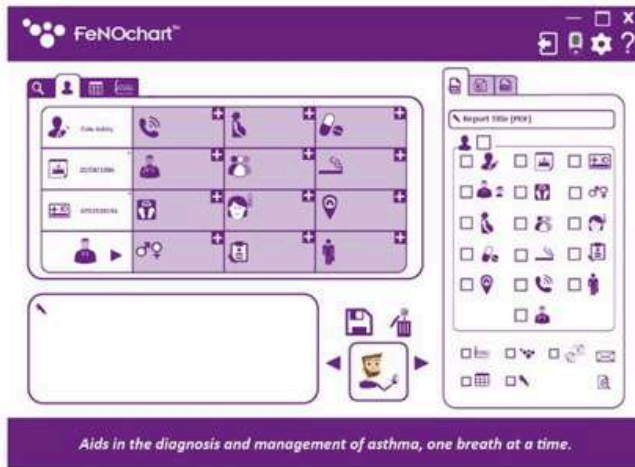

#### Επεξεργασία λογαριασμού χρήστη

Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ ασθενούς, ανοίξτε τη βάση δεδομένων ασθενούς και επιλέξτε τον ασθενή που θέλετε να τροποποιήσετε. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Προφίλ".

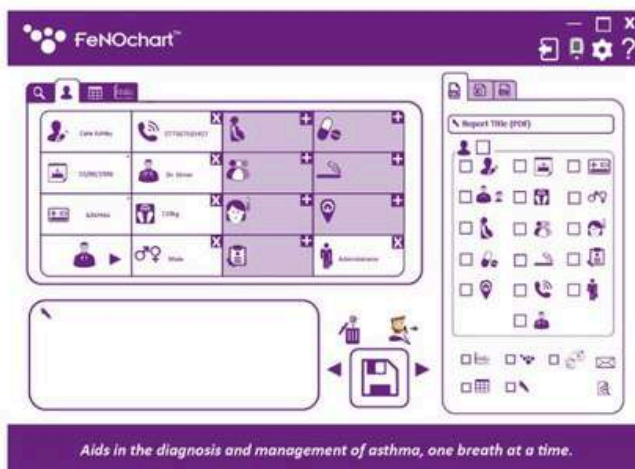

Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες όπως θέλετε. Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα, κάντε κλικ στα «Βέλη» για να επιλέξετε το εικονίδιο «Αποθήκευση».

Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αποθήκευση» και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που ζητά επιβεβαίωση. Κάντε κλικ στο ναι για να διατηρήσετε τις αλλαγές.



#### Διαγραφή προφίλ ασθενούς

Για να διαγράψετε ένα προφίλ ασθενούς, ανοίξτε τη βάση δεδομένων ασθενούς και επιλέξτε τον ασθενή που θέλετε να διαγράψετε. Κάντε κλικ στα βέλη για να καρτέλα την ενέργεια κουμπί στο εικονίδιο «Διαγραφή».

Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Διαγραφή» και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που ζητά επιβεβαίωση. Κάντε κλικ στο ναι για να διαγράψετε το προφίλ ασθενούς.



### Κάντε μια εξέταση σε προφίλ ασθενούς

Για να ξεκινήσετε μια δοκιμή από ένα προφίλ ασθενούς, ανοίξτε τη βάση δεδομένων ασθενών και επιλέξτε τον ασθενή που θα εξεταστεί. Κάντε κλικ στα βέλη για να επιλέξετε το κουμπί δράσης στο εικονίδιο «Δοκιμή αναπνοής».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εικονίδιο «Δοκιμή αναπνοής» θα είναι είτε ενήλικας είτε παιδί ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού τους.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Δοκιμή αναπνοής» και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που ζητά επιβεβαίωση για την έναρξη της δοκιμής. Κάντε κλικ ναι για να ξεκινήσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε μια δοκιμή NObreath® FeNO.

Τα αποτελέσματα θα αποθηκευτούν αυτόματα στο προφίλ του ασθενούς.



### Αναζήτηση προφίλ ασθενών

Για να εντοπίσετε έναν συγκεκριμένο ασθενή στη βάση δεδομένων ασθενών, χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης για να εισαγάγετε είτε όνομα, αναγνωριστικό ή αριθμό ασθενούς.



Όταν ένα όνομα, ένα αναγνωριστικό ή ένας αριθμός ασθενούς έχει εισαχθεί στη γραμμή αναζήτησης, μόνο οι ασθενείς που περιλαμβάνουν τα κριτήρια αναζήτησης θα εμφανίζονται στην οθόνη.



Εάν οι πληροφορίες εισήχθησαν στην αναζήτηση Η γραμμή δεν σχετίζεται με κανέναν ασθενή στη βάση δεδομένων ή δεν είναι ένα από τα κριτήρια που καθορίζονται παραπάνω, ένα αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανιστεί στην οθόνη που θα ρωτά εάν πρέπει να δημιουργηθεί ένα προφίλ ασθενούς χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αναζητήθηκαν.

Εάν αυτό απαιτείται, επιλέξτε ναι ή όχι για αναζήτηση ξανά.

## Συγχρονισμός με το FeNOchart™

Το FeNOchart™ έχει τη δυνατότητα λήψης προφίλ ασθενών και αποτελεσμάτων από το NObreath® και αποθήκευσης στη βάση δεδομένων FeNOchart™.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο τεχνικά δεδομένα και κανένα στοιχείο ασθενούς συλλέγονται από το Bedfont®.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οσυγχρονισμός θα είναι επιτυχής μόνο εάν υπάρχουν ενδείξεις σε ένα προφίλ στο NObreath®. Εάν υπάρχει προφίλ αλλά δεν έχουν αποθηκευτεί μετρήσεις, οσυγχρονισμός δεν θα είναι δυνατός καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα για συγχρονισμό.



Για να ξεκινήσετε το συγχρονισμό, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η συσκευή NObreath® FeNO είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Μόλις συνδεθεί, ένα μικρό εικονίδιο NObreath® θα εμφανιστεί στην επάνω δεξιά γωνία του FeNOchart™.



Για πρόσβαση στην οθόνη συγχρονισμού, κάντε κλικ στο εικονίδιο «Ρυθμίσεις» και μετά «Συγχρονισμός».



1. Προφίλ ασθενών στο NObreath®
  2. Ενέργεια συγχρονισμού
  3. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το συγχρονισμό
  4. Προφίλ ασθενών στο FeNOchart™
- βάση δεδομένων
5. Αναζήτηση προφίλ ασθενούς FeNOchart™
  6. Αντικαταστήστε το όνομα ασθενούς
  7. Κουμπί συγχρονισμού



### Λήψη αποτελεσμάτων σε ένα υπάρχον προφίλ

Κάντε κλικ στον ασθενή που πρόκειται να συγχρονιστεί. Κάνοντας κλικ στο βέλος δίπλα στο όνομα του ασθενούς, είναι επίσης δυνατό να επιλέξετε συγκεκριμένες μετρήσεις για συγχρονισμό με το FeNOchart™.




Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το συγχρονισμό αλλάζοντας το «No Operation» σε «Device to Database».

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία «KEEP» έχει επιλεγεί ως αυτή θα κατεβάσει τα αποτελέσματα από τα επιλεγμένα προφίλ στο NObreath® και προσθέστε τα σε ένα υπάρχον προφίλ στο FeNOchart™.



Το FeNOchart™ θα αναγνωρίσει αυτόματα τα ονόματα/τα αναγνωριστικά ασθενών και θα προτείνει ένα υπάρχον προφίλ για συγχρονισμό εάν αναγνωρίζει παρόμοιες λεπτομέρειες. Εάν προτείνεται οεσφαλμένος ασθενής, κάντε κλικ στον μεγεθυντικό φακό για να αναζητήσετε εναλλακτικά προφίλ στη βάση δεδομένων ασθενών FeNOchart™.

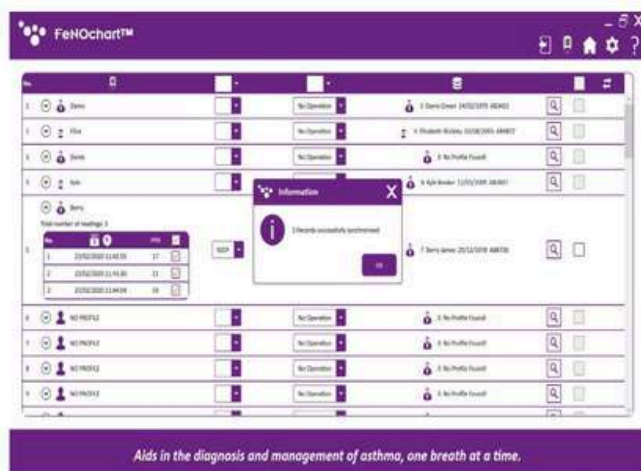

Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο με τα υπάρχοντα προφίλ ασθενών που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων FeNOchart™. Επιλέξτε τον σωστό ασθενή από αυτήν τη λίστα και κάντε κλικ στο «Επιλογή προφίλ» για να συνεχίσετε.

Για να ολοκληρώσετε τον συγχρονισμό, κάντε κλικ στο κουμπί 'Συγχρονισμός' στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα. Μετά την ολοκλήρωση θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο.


## Διαγραφή υπάρχοντος προφίλ μέσω συγχρονισμού

Επιλέξτε τον ασθενή που θα διαγραφεί από τη βάση δεδομένων FeNOchart™.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το προτεινόμενο προφίλ ασθενούς θα διαγραφεί μόνο από τη βάση δεδομένων FeNOchart™. το αντίστοιχο προφίλ θα παραμείνει στη συσκευή NObreath®.

Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το συγχρονισμό αλλάζοντας το «No Operation» σε «Device to Database». Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία «ΔΙΑΓΡΑΦΗ», καθώς θα αφαιρέσει το αντίστοιχο προφίλ από τη βάση δεδομένων FeNOchart™. Βεβαιωθείτε ότι το προτεινόμενο προφίλ είναι το σωστό προφίλ που πρέπει να διαγραφεί από τη βάση δεδομένων FeNOchart™ ή αναζητήστε στη βάση δεδομένων άλλο προφίλ.



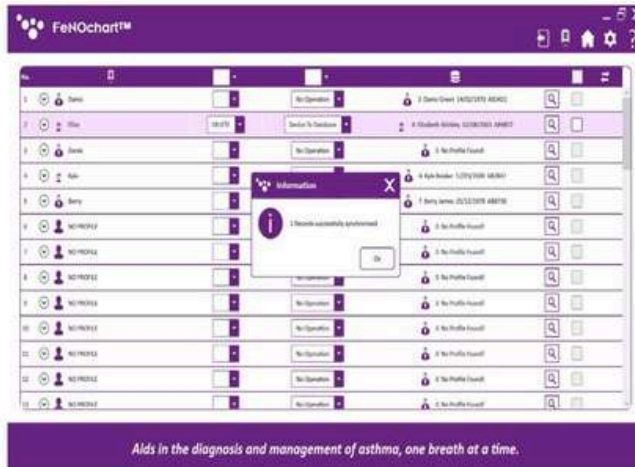

Για να ολοκληρώσετε τον συγχρονισμό, κάντε κλικ στο κουμπί 'Συγχρονισμός' στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα. Μετά την ολοκλήρωση θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο.



Κάντε κλικ στο «OK» για να συνεχίσετε και το προφίλ ασθενούς θα έχει διαγραφεί από τη βάση δεδομένων FeNOchart™.




Διαγράψτε τις μετρήσεις από ένα υπάρχον προφίλ ασθενούς μέσω συγχρονισμού

Επιλέξτε τον ασθενή από τον οποίο θα διαγράψετε τα αποτελέσματα, από τη βάση δεδομένων FeNOchart™.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα αποτελέσματα από το προτεινόμενο προφίλ ασθενούς θα διαγραφούν μόνο από τη βάση δεδομένων FeNOchart™, τα αποτελέσματα για το αντίστοιχο προφίλ θα παραμείνουν στη συσκευή NObreath®.

Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το συγχρονισμό αλλάζοντας το «No Operation» σε «Device to Database».

Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία 'CLEAR' καθώς αυτή θα διαγράψει τα αποτελέσματα εντός του αντίστοιχου προφίλ από τη βάση δεδομένων FeNOchart™. Βεβαιωθείτε ότι το προτεινόμενο προφίλ είναι το σωστό προφίλ για διαγραφή των αποτελεσμάτων ή αναζήτηση στη βάση δεδομένων για άλλο προφίλ.

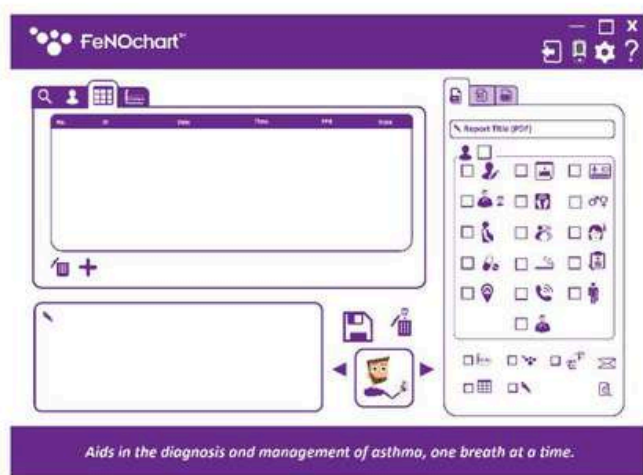

Για να ολοκληρώσετε τον συγχρονισμό, κάντε κλικ στο κουμπί 'Συγχρονισμός' στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα. Μετά την ολοκλήρωση θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο. Το προφίλ ασθενούς θα εξακολουθεί να υπάρχει στη βάση δεδομένων FeNOchart™ αλλά δεν θα έχει πλέον κανένα αποτέλεσμα.



Δημιουργήστε ένα νέο προφίλ ασθενούς στο FeNOchart™ μέσω συγχρονισμού

Επιλέξτε τον ασθενή που θα συγχρονιστεί με τη βάση δεδομένων FeNOchart™. Εάν το FeNOchart™ δεν μπορεί να βρει/προτείνει ένα υπάρχον προφίλ στη βάση δεδομένων για συγχρονισμό, μπορεί να δημιουργηθεί.

Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το συγχρονισμό αλλάζοντας το «No Operation» σε «Device to Database». Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ στη βάση δεδομένων FeNOchart™.



Για να ολοκληρώσετε τον συγχρονισμό, κάντε κλικ στο κουμπι 'Συγχρονισμός' στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα. Μετά την ολοκλήρωση θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο. Το προφίλ ασθενούς και οι ενδείξεις θα υπάρχουν τώρα τόσο στη συσκευή NObreath® FeNO όσο και στη συσκευή Βάση δεδομένων FeNOchart™.

Αντικαταστήστε τα αποτελέσματα σε ένα υπάρχον προφίλ μέσω συγχρονισμού



Επιλέξτε τον ασθενή με τον οποίο θα αντικαταστήσετε τα αποτελέσματα από τη βάση δεδομένων FeNOchart™.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα αποτελέσματα από το προτεινόμενο προφίλ ασθενούς στο FeNOchart™

Η βάση δεδομένων θα αντικατασταθεί από τα αποτελέσματα για το αντίστοιχο προφίλ στη συσκευή NObreath®.

Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το συγχρονισμό αλλάζοντας το «No Operation» σε «Device to Database».

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» είναι επιλεγμένη ως αυτό θα αντικαταστήσει τα αποτελέσματα εντός του αντίστοιχο προφίλ από το FeNOchart™ βάση δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι το προτεινόμενο προφίλ είναι το σωστό προφίλ για διαγραφή των αποτελεσμάτων ή αναζήτηση στη βάση δεδομένων για άλλο προφίλ.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Επιλέγοντας το πλαίσιο «Αντικατάσταση ονόματος προφίλ», το όνομα προφίλ στη βάση δεδομένων FeNOchart™ θα αντικατασταθεί επίσης για να ταιριάζει με το όνομα όπως εμφανίζεται στη συσκευή.



Για να ολοκληρώσετε τον συγχρονισμό, κάντε κλικ στο κουμπί 'Συγχρονισμός' στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο μετά την ολοκλήρωση. Οι μετρήσεις του προφίλ ασθενούς (και το όνομα εάν είναι επιλεγμένο) θα έχουν πλέον αντικατασταθεί στη βάση δεδομένων FeNOchart™ να ταιριάζει με αυτά του αντίστοιχου προφίλ στη συσκευή NObreath®.

Βίντεο με οδηγίες




Τα βίντεο «How-To» της συσκευής NObreath® FeNO περιλαμβάνονται αυτόματα στο λογισμικό FeNOchart™. Για να δείτε τη λίστα των βίντεο, κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αναπαραγωγή» και επιλέξτε το βίντεο που θέλετε για αναπαραγωγή.

## Κάνοντας τεστ αναπνοής




Για να κάνετε ένα τεστ αναπνοής, κάντε κλικ είτε στο "Ενηλίκων Τεστ αναπνοής" ή «Δοκιμή αναπνοής παιδιού» από το αρχική οθόνη. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε το τεστ αναπνοής.

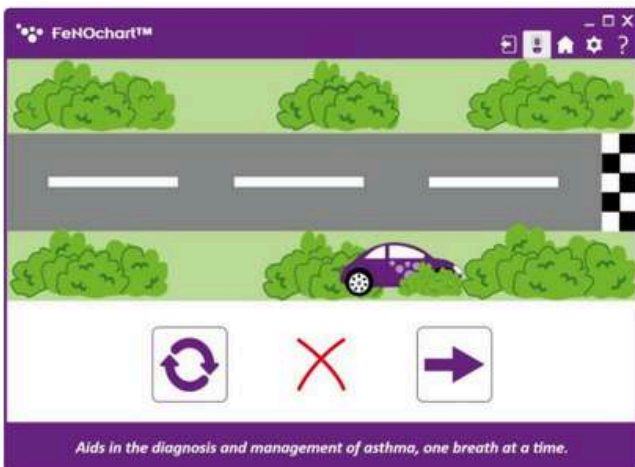

Ένα ανεπιτυχές τεστ αναπνοής θα δείξει κόκκινο 'X'.


Για να δοκιμάσετε ξανά το τεστ αναπνοής κάντε κλικ στο εικονίδιο «Επανάληψη» ή κάντε κλικ στο «Βέλος» για να συνεχίσετε στα αποτελέσματα.

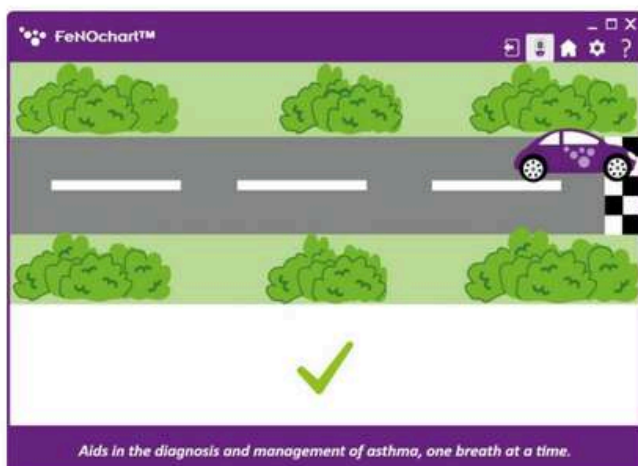

Ένα επιτυχημένο τεστ αναπνοής θα εμφανιστεί με ένα πράσινο τσιμπούρι.



Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στη συνέχεια στην οθόνη. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Επανάληψη» για να κάνετε μια νέα εξέταση ή στο εικονίδιο «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα στο προφίλ ενός ασθενούς.

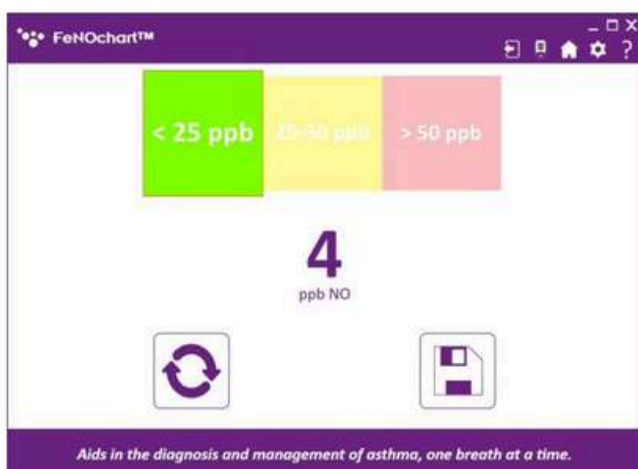


Επιλέξτε έναν ασθενή από τη λίστα για να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα στο προφίλ του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάνετε τεστ αναπνοής ενηλίκων, θα αναφέρονται μόνο τα προφίλ ενηλίκων ασθενών.



Μόλις το αποτέλεσμα αποθηκευτεί στο προφίλ ενός ασθενούς, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια άλλη εξέταση κάνοντας κλικ στο κουμπί επανάληψης δοκιμής ή κάντε κλικ στο εικονίδιο «Γράφημα» για να δείτε το γράφημα των αποτελεσμάτων στο προφίλ του ασθενούς.

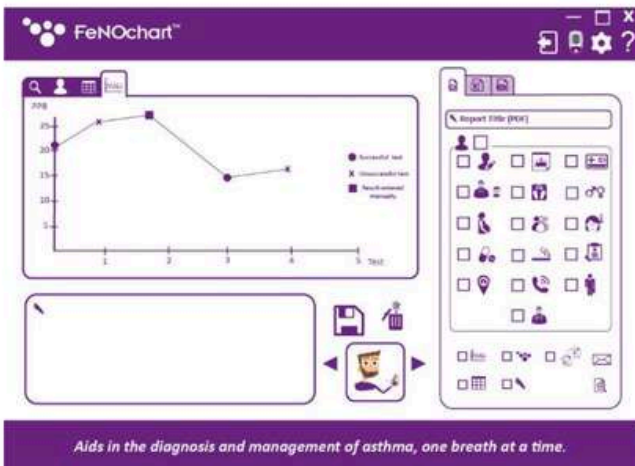



## Δημιουργία Αναφορών



Μόλις ολοκληρωθεί μια δοκιμή και αποθηκευτεί σε ένα προφίλ, μπορεί να δημιουργηθεί μια αναφορά. Επιλέξτε το απαιτούμενο προφίλ ασθενούς και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα κριτήρια αναφοράς που πρόκειται να συμπεριληφθούν. Υπάρχουν επίσης επιλογές για να συμπεριλάβετε ένα γράφημα των αποτελεσμάτων, τον πίνακα αποτελεσμάτων, το λογότυπο της εταιρείας και πρόσθετες σημειώσεις στην αναφορά. Υπάρχει επίσης η επιλογή δημιουργίας σύντομης αναφοράς, η οποία περιλαμβάνει μόνο τα αποτελέσματα του ασθενούς. Εάν επιθυμείτε μια σύντομη αναφορά, επιλέξτε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, είτε το εικονίδιο φακέλου για να δημιουργήσετε μια αναφορά με τη μορφή email, είτε το εικονίδιο προβολής εγγράφων για μια αναφορά σε μορφή αρχείου PDF.

## Δοκιμή περιβάλλοντος Προσεχώς

## Επιλογές συσκευής



Όταν μια συσκευή NObreath® είναι συνδεδεμένη στο λογισμικό

FeNOchart™, το εικονίδιο 'NObreath®' θα εμφανιστεί στην επάνω δεξιά γωνία.

Κάνοντας κλικ σε αυτό και τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από τη συσκευή θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν μεταφέρονται δεδομένα από το NObreath® στον υπολογιστή, για παράδειγμα κατά τη λήψη τυχόν αρχείων καταγραφής από το μενού Επιλογές συσκευής, το λογότυπο Bedfont® θα αναβοσβήνει στο επάνω μέρος του παραθύρου.

### Ρυθμίσεις λογισμικού




Στις ρυθμίσεις λογισμικού, μπορείτε να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα κριτήρια για τα προφίλ και τις αναφορές ασθενών και πολλά άλλα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Ρυθμίσεις" στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

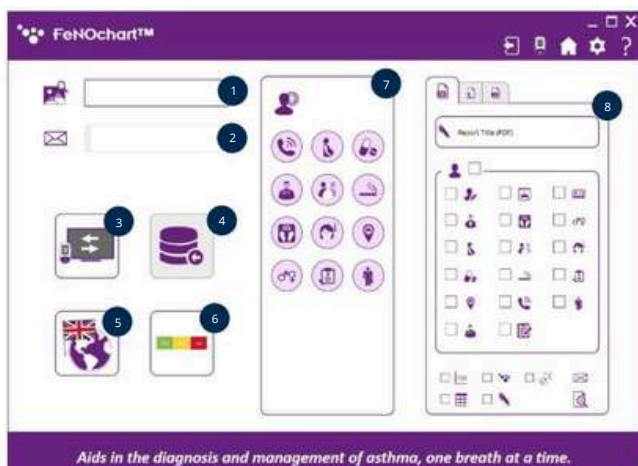


## Ρυθμίσεις FeNOchart™

1. Ορίστε το προεπιλεγμένο λογότυπο αναφοράς
2. Ορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση email (προσεχώς)
3. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον κατοπτρισμό οθόνης
4. Εισαγωγή βάσης δεδομένων (προσεχώς)
5. Αλλάξτε τη γλώσσα λογισμικού
6. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ερμηνείας αποτελεσμάτων (προσεχώς)
7. Αλλάξτε τα προεπιλεγμένα κριτήρια προφίλ ασθενούς
8. Αλλάξτε τα προεπιλεγμένα κριτήρια αναφοράς

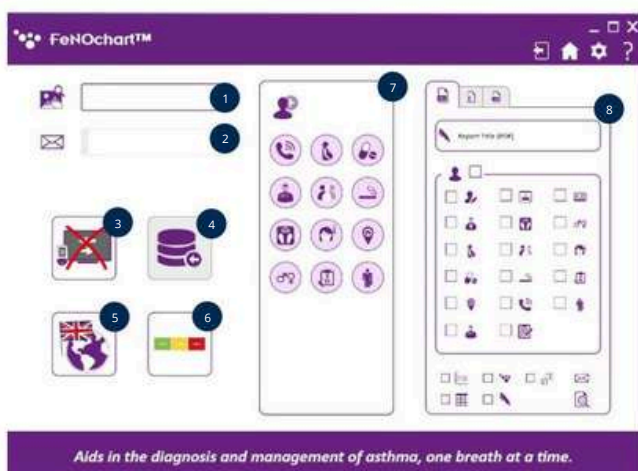

## Επεξεργασία λογαριασμού χρήστη


Από εδώ, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης τους ήρωτησεις και απαντήσεις ασφαλείας.

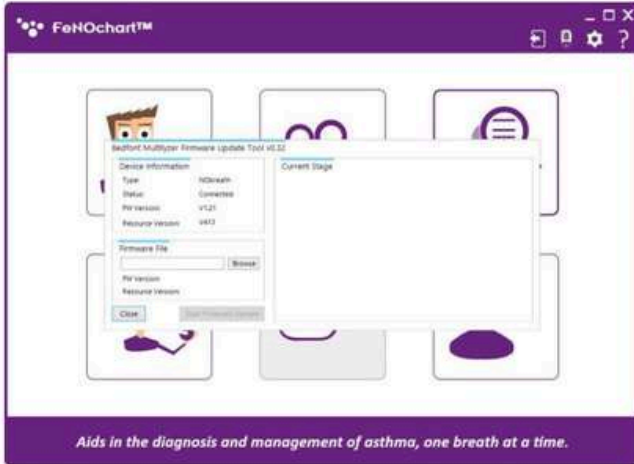

#### Εργαλείο ενημέρωσης υλικολογισμικού

Όταν το υλικολογισμικό NObreath® χρειάζεται ενημέρωση, αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας το Εργαλείο ενημέρωσης υλικολογισμικού από το μενού ρυθμίσεων λογισμικού.



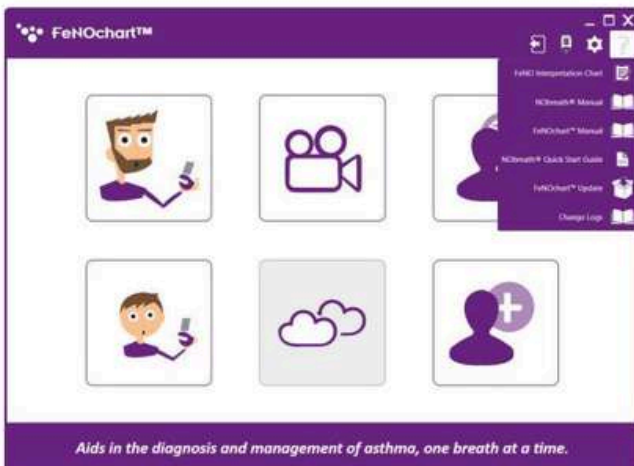


































**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στην πρώτη περίπτωση, το Εργαλείο ενημέρωσης υλικολογισμικού πρέπει να εγκατασταθεί ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Κάθε φορά μετά, επιλέγοντας το Εργαλείο ενημέρωσης υλικολογισμικού από το μενού Ρυθμίσεις λογισμικού θα ανοίξει απλώς το πρόγραμμα.




#### Μενού βοήθειας

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού βοήθειας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Ερωτηματολόγιο» στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Από εδώ, μπορείτε να κάνετε λήψη χρήσιμων εγγράφων και το FeNOchart™ μπορεί να ελέγξει για ενημερώσεις λογισμικού.

## Επεξήγηση εικονιδίων

Όνομα(α) ασθενούς		Γένος		Επάγγελμα	
Παιδικό προφίλ		Φάρμακο		Συνταγές	
Ημερομηνία γεννήσεως		Κατάσταση εγκυμοσύνης		Πρόσθετες σημειώσεις	
Αριθμός τηλεφώνου		Κατάσταση καπνίσματος		Επόμενη ενέργεια	
Ταυτότητα ασθενούς		Εθνότητα		Προηγούμενη ενέργεια	
Γιατρός		Διεύθυνση		Εκτός	
Προφίλ ενηλίκων		Συμπτώματα		Διαγραφή προφίλ ασθενούς	
Βάρος		Συμπεριλάβετε τον πίνακα αποτελεσμάτων στην αναφορά		Προβολή πίνακα του αποτελέσματα	
Συμπεριλάβετε γράφημα στην αναφορά		Συμπεριλάβετε το λογότυπο στην αναφορά		Αναφορά μέσω email	
Τεστ αναπνοής ενηλίκων		Παιδικό τεστ αναπνοής		Προβολή γραφήματος αποτελεσμάτων	
Προεπισκόπηση αναφοράς		Δείτε επιπλέον σημειώσεις		Προβολή βάσης δεδομένων ασθενών	
Διαγραφή αποτελέσματος		Προβολή προφίλ ασθενούς		Προσθέστε ένα αποτέλεσμα με μη αυτόματο τρόπο	
Ημερομηνία		Φορά		Σύντομη αναφορά	

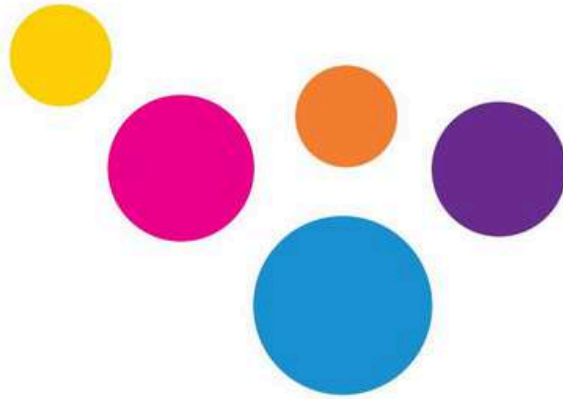

**bedfont**<sup>®</sup>  
εκτίμηση 1976

## Παγκόσμιοι ηγέτες στην ανάλυση αναπνοής.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.bedfont.com/resources](http://www.bedfont.com/resources) για να προβάλετε αυτό το έγγραφο σε άλλες γλώσσες.



Bedfont® Scientific Ltd.  
Station Road, Harrietsham, Maidstone, Kent,  
ME17 1JA Αγγλία Τηλ: +44  
(0)1622 851122 Φαξ: +44 (0)1622 854860 Email:  
[ask@bedfont.com](mailto:ask@bedfont.com) Ιστότοπος: [www.bedfont.com](http://www.bedfont.com)



Στίβεν Ρόου  
Cristimar E4-1  
Ave Juan Carlos I  
Los Cristianos, Arona, 38650  
Santa Cruz de Tenerife, Ισπανία

© Bedfont® Scientific Limited 2023

Τεύχος 7 -Απρίλιος 2023, Αρ. Μέρους: HLAB776

Bedfont® Scientific Limited διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να ενημερώσει τη βιβλιογραφία του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εγγεγραμμένος σε: Αγγλία και Ουαλία. Αριθμός εγγραφής: 1289798



MD 502905