

DERMOJET®

καθαρισμός και αποστείρωση

Πριν απολυμανθεί το DERMOJET®, πρέπει να αποσυναρμολογηθεί:

- Ξεβιδώστε την κεφαλή της συσκευής, αφαιρέστε τον κύλινδρο και το πώμα αποστάτη.
- Όλα τα αντικείμενα μπορούν να απολυμανθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κύλινδροι από βοριοπυριτικό γυαλί μπορεί να σπάσουν εάν χτυπηθούν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ			DERMOJET
προετοιμασία σε ο χρήση εγκατάσταση	αρχαιοθέτηση	Βρεγμένος Ξηρός	- +
	παρασκευή	Επιλογή σύμφωνα με τον καθαρισμό και διαδικασία απολύμανσης	
	καθάρισμα	Χειροκίνητα	+ Καθαρισμός της κεφαλής του μπικ: Ξεπλύνετε το DERMJET χρησιμοποιώντας το καλνδρό με μέγιστο 1 ml αποσταγμένο νερό και ουδέτερο έχει γεμίσει απορρυπαντικό. Μετά το Πιέζετε DERMJET για να να ρουφήξει υγρό. Το ίδιο Η διαδικασία γίνεται με καθαρή απόσταξη νερό για να επαναλάβει το Ξεπλύνετε εντελώς το DERMJET.
		μηχανή	+ Όλα τα στοιχεία του Dermjet στο Ρυθμίστε ένα πλύσιμο πλέων (κατά προτίμηση όρθια) και χρησιμοποιώντας το Κύκλος καθαρισμού που βρίσκονται στο μηχανισμική μονάδα για επικυρωμένα χειρουργικά εργαλεία ήταν καθαρά.
		Με υπερηχογράφημα	+
		αλκαλική είδη καθαριότητας	+ Χωρίς απορρυπαντικό υποχλωριώδους νατρίου (χρησιμοποιήστε χλωρίνη).
		θυμώνω είδη καθαριότητας	-
		ουδέτερος είδη καθαριότητας	+
	συνέλευση	Επανατοποθετήστε τον κύλινδρο και το κεφάλι στο περίβλημα (το οποίο το σύστημα πλήρωσης περιλαμβάνει) βίδες. Το καπάκι αποστάτη φορέστε ξανά. Μην χρησιμοποιείτε κανένα λιπαντικό.	
	Πλύση	Για το ξέπλυμα της συσκευής, 1 ml απεσταγμένο νερό στον κύλινδρο και στη συνέχεια με τη λειτουργία της συσκευής ψεκάζεται.	
	Απολυμαίνω	χημική ουσία	Για να απολυμάνετε και να στεγνώσετε το Ξεβιδώστε την κεφαλή από το περίβλημα και ολόκληρη η συσκευή στο εμβάτηση σε απολυμαντικό διάλυμα.
		Θερμική μέγιστη	+
	ξηρός	Θερμοκρασία	όχι πάνω από 120°C

DERMOJET®

καθαρισμός και αποστείρωση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ			DERMOJET
συντήρηση	Το Dermjet μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο συχνά θέλετε να αποστειρωθούν υπό την προϋπόθεση ότι όλα 4000 ενέσεις ή κάθε 18η μήνες μια επιθεώρηση είναι φτιαγμένο.	Το Dermjet πρέπει να χρησιμοποιείται μετά από κάθε ολοκληρωμένη θεραπεία άδειασε, καθαρίστηκε και να αποστειρωθεί.	Ξεβιδώστε την κεφαλή κύλινδρο και το πώμα αποστάτη αφαιρώ. Όλα τα αντικείμενα μπορούν να αποστειρωθούν θα.
		υγρή θερμότητα (συνιστάται Μέθοδος)	18 λεπτά στο 134°C και 2,2 bar. χρόνος στεγνώματος τουλάχιστον 30 λεπτά. +
		ατμός και φορμαλδευγή πιο χαμηλα θερμοκρασία	-
		οξείδιο του αιθυλενίου	+
		ξηρή θερμότητα	-
		υγρό παράγοντας αποστείρωσης	+
		αέριο πλάσματος	-

ΤΙΤΛΟΦΟΡΗΣΗ

+ κατάλληλος

- δεν είναι κατάλληλο

Διαδικασία σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 17664

Το DERMOJET® διατίθεται σε διάφορα μοντέλα:


Το DERMOJET Standard έχει έναν κύλινδρο και ένα διαχωριστικό πώμα κατασκευασμένο από πολυσουλφόνη.

Το DERMOJET HR διαθέτει κύλινδρο από βοριοπυριτικό γυαλί και κάλυμμα αποστάτη από ανοξείδωτο χάλυβα.

Το DERMOJET Polymedical διαθέτει κύλινδρο από βοριοπυριτικό γυαλί και εναλλάξιμα εξαρτήματα.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το DERMJET άδειο.
Αυτό μπορεί να βλάψει την προσάρτηση του DERMJET
Πολυϊατρικά και ο κύλινδρος οδηγούν και τα καθιστούν αχρησιμοποίητα.

Οδηγίες για τη χρήση των εναλλάξιμων συμβουλών στο μοντέλο Polymedical:

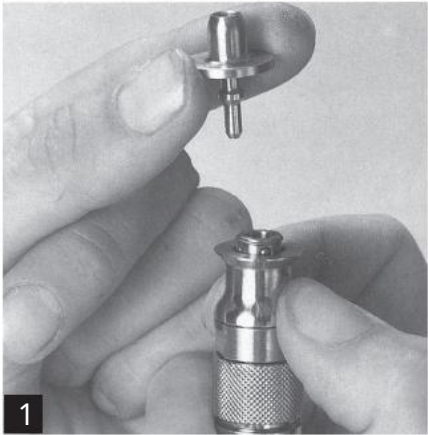

Το εξάρτημα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο όταν ο δακτύλιος έχει πιεστεί για να αποκαλύψει το περίβλημα της κεφαλής



Αφήστε το δακτύλιο (το εξάρτημα έχει πλέον τοποθετηθεί σωστά). Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος του προσαρτήματος και το επάνω μέρος της συσκευής είναι ακριβώς το ένα απέναντι στο άλλο



Το κάτω μέρος του προσαρτήματος είναι βαθιά μέσα σε αυτό
Εισαγάγετε το σώμα της κεφαλής της συσκευής, κρατώντας τον δακτύλιο στην κάτω θέση του κρατήστε θέση



Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν Το εξάρτημα δεν εφαρμόζει σωστά



Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης

DERMOJET® Standard, HR,
Πολυϊατρική
Σημαντικό: Πριν από τη χρήση, πεθάνετε
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης

κάνω αίτηση

Το DERMJET®

α) Πρέπει να είναι αποκλειστικά ιατρικού χαρακτήρα
χρησιμοποιείται νοσηλευτικό προσωπικό

β) προορίζεται για υποδόρια ένεση δόσης 0,1 ml για

- Τοπική αναισθησία
- Ένεση κορτικοειδών
- ιατρική θεραπεία υπερτροφικών και χηλοειδών ουλών

- Θεραπεία κονδυλωμάτων

! Χρησιμοποιείτε μόνο φάρμακα που
είναι εγκεκριμένα στην αγορά.
Μετά από ιατρική συνταγή και έλεγχο συμβατότητας με
τη συσκευή.

II Περιγραφή της συσκευής

Το DERMJET αποτελείται από τέσσερα μέρη:

α) Σώμα σύριγγας εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα,
με κεντρικό έμβολο, ελατήριο τάνυσης και μοχλό τάνυσης.

β) Κεφαλή έγχυσης, στην οποία βρίσκεται η πλειονότητα
των αντικαταστάσιμων φθαρμένων εξαρτημάτων, π.χ
φλάντζες, φίλτρα, ακροφύσιο ρουμπίνι, ...

γ) Κύλινδρος από διαφανές βοριοπιρυνικό γυαλί
(εύθραυστο) ή πολυσουλφόνη χωρητικότητας 4 ml
Χορηγείται 0,1 ml ανά ένεση.

δ) Καπάκι αποστάτη πολυσουλφόνης ή
Ανοξείδωτο ατσάλι (για το Dermojet Polymedical με
Κάντε κλικ στο σύστημα στο οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά
τα συνημμένα μπορούν να κουμπώσουν στη θέση τους)

III Προφυλάξεις στο

Χειρισμός, ή Αντιμετώπιση

α) Το DERMJET παραδίδεται μη αποστειρωμένο και πρέπει
να αποστειρώνεται πριν από κάθε χρήση.
Διαβάστε τις οδηγίες για την αποστείρωση πριν από κάθε
χειρισμό.

β) Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, μην αποσυναρμολογείτε
ποτέ το DERMJET.

Το DERMJET πρέπει να επισκευαστεί από την AKRA
DERMJET ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

γ) Μη χρησιμοποιείτε το DERMJET με άδειο κύλινδρο.

δ) Μετά τη χρήση, ο κύλινδρος πρέπει να αδειάσει (για
αποθήκευση με αποσταγμένο
Γεμίστε με νερό για να αποφύγετε να στεγνώσουν οι
τσιμούχες όταν τελειώσει η μονάδα
δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.)

ε) Αποθηκεύστε το DERMJET σε όρθια θέση.


στ) Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 4000
χρήσεις ή κάθε 18 μήνες.

! Δεδομένου ότι η συσκευή είναι εξοπλισμένη
με στεγανοποιητικό υλικό Viton, η κατάσταση των
σφραγίδων πρέπει να ελέγχεται τακτικά.
Εάν υπάρχουν μαύρα σωματίδια που επιπλέουν στον
κύλινδρο, η λειτουργία του DERMJET πρέπει να διακοπεί
αμέσως και να γίνει πλήρης έλεγχος της συσκευής. Αυτό
συμβαίνει επειδή εάν η συσκευή δεν συντηρηθεί σωστά,
τα σωματίδια του στεγανοποιητικού υλικού μπορούν να
αποβληθούν μέσω του ακροφυσίου. Σε αυτήν την
περίπτωση, ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο να αντικαταστήσει τις επίπεδες φλάντζες
#28 και 31, τους δακτύλιους Ο #6, 7 και 12 και τα φίλτρα.

IV τεχνική ένεσης

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα σε καθαρό, κλειστό χώρο:

Γέμισμα του κυλίνδρου:
Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την κεφαλή έγχυσης μαζί με τον
κύλινδρο, αφαιρέστε το επιθυμητό φαρμακευτικό διάλυμα
από το αρχικό του δοχείο χρησιμοποιώντας μια
αποστειρωμένη σύριγγα και στη συνέχεια αδειάστε το
στον κύλινδρο.

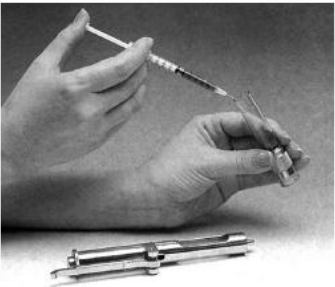

Ο κύλινδρος μπορεί να γεμίσει με 4 ml υγρού, που
αντιστοιχεί σε 40 εφαρμογές των 0,1 ml η καθεμία.

Αφού γεμίσετε τον κύλινδρο, βιδώστε ξανά σφιχτά την
κεφαλή έγχυσης εντός 10 δευτερολέπτων για να
διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία (διαφορετικά η δόση
μπορεί να διαφέρει κατά ± 5%).


! Προσοχή: Οι γυάλινες αμπούλες δεν πρέπει να
εισάγονται στον κύλινδρο!

Σφίγγω:

Για να σφίξετε τη συσκευή, κρατήστε την κάθετα και πιέστε
προς τα κάτω το μοχλό σύσφιξης (αρ. 126).



Η συσκευή θα πρέπει να εκπέμπει έναν ελάχιστο
ακουστικό, θαμπό θόρυβο και το
Ανύψωση κουμπιού απελευθέρωσης περίπου 0,5 cm:

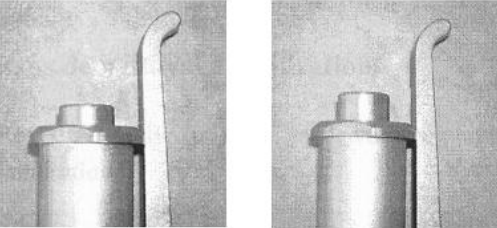

DERMJET® χαλαρό DERMJET® σε ένταση

Προσοχή, όταν το DERMJET είναι οπλισμένο, μην
πατήσετε κατά λάθος το κουμπί απελευθέρωσης πριν να
γίνει η ένεση.

πυροβολισμός σκανδάλης:

Σημειώστε ότι λίγος αέρας παραμένει στο κανάλι της
κεφαλής μετά το ξεβίδωμα της κεφαλής έγχυσης και
ιδιαίτερα μετά την αποστείρωση. Ο αέρας διαφεύγει
πιέζοντας τη ράβδο του εμβόλου μέσω του κυλίνδρου στο
κανάλι κεφαλής 2 έως 3 φορές και στη συνέχεια ρίχνοντας
3 ή 4 βολές στο κενό.

Ο πίδακας υγρού υποδεικνύει εάν το DERMJET είναι
αεριζόμενο και έτοιμο για λειτουργία.

Για την ένεση, το κάλυμμα αποστάτη τοποθετείται στο
δέρμα, όσο το δυνατόν πιο κάθετα στην επιφάνεια του
δέρματος, και στη συνέχεια πιέζεται το κουμπί
απελευθέρωσης (αρ. 120).
Το βάθος διείσδυσης εξαρτάται από το σημείο της ένεσης,
καθώς και από την απόσταση και τη γωνία μεταξύ της
συσκευής και της επιφάνειας του δέρματος. Γενικά, είναι
μεταξύ 4 και 6 mm. Ο σχηματισμός ενός ροδιού, με ένα
μικροσκοπικό άνοιγμα ορατό στην κορυφή, επιτρέπει τον
άμεσο οπτικό έλεγχο.

V Περιορισμοί Εφαρμογής

Το DERMJET δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μέρη του
σώματος που θα μπορούσαν να καταστραφούν από μια
ένεση με πίεση, ειδικά στον βολβό του ματιού και στα
αιμοφόρα αγγεία.

VI καθαρισμός και αποστείρωση

! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες καθαρισμού
και αποστείρωσης.

! Η συσκευή πρέπει να αποστειρώνεται πριν
από κάθε χρήση. Οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης.


! Το DERMJET παραδίδεται μη αποστειρωμένο
και πρέπει να αποστειρώνεται πριν από κάθε χρήση.

VII- Εγγύηση

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο για ένα έτος έναντι
κατασκευαστικών ελαττωμάτων (δωρεάν επισκευή
ελαττωμάτων, για μέγιστο 4000 εγχύσεις, οι σφραγίδες, το
πώμα αποστάτη και ο κύλινδρος είναι "αναλώσιμα μέρη"
και επομένως δεν καλύπτονται από την εγγύηση).

DERMOJET®

Κατάλογος εξαρτημάτων

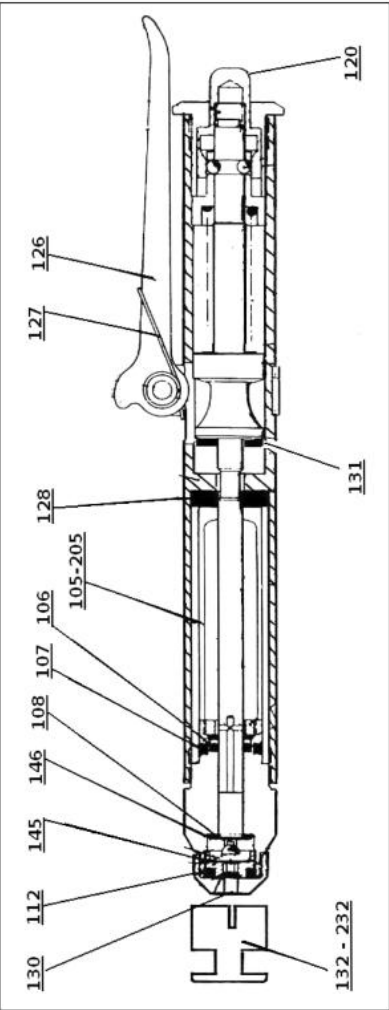

Κάθε DERMJET® έχει έναν ξεχωριστό σειριακό
αριθμό, που διευκολύνει τον εντοπισμό.

DERMJET® είναι, σύμφωνα με την ΕΕ, Polymedical
που κατασκευάζονται στη Γαλλία.

Η σήμανση CE επιβεβαιώνει ότι το προϊόν πληροί τις
απαιτήσεις της Οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
93/42/EOK.

Έκδοση: 01/14B
Ημερομηνία: 14/01
CE 1014

AKRA DERMJET®

23, Bis Rue LOUIS-BARTHOUSSE
64000 PAU - ΓΑΛΛΙΑ

Τηλ: +33 (0)5 59 27 47 46
Φαξ: +33(0)5 59 27 22 70
Ταχυδρομείο: dermojet@club-internet.fr
http://www.dermojet.com