

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE



fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

100% Fiocchetti the new standard

- + 40 anni di esperienza nel mercato della refrigerazione per ottenere la "gestione del freddo allo stato dell'arte"
- + Macro gamme: medicale, farmacia, ospedaliera, trasfusionale
- + Design innovativo. Linee pulite e funzionali
- + Elettronica all'avanguardia, massimo controllo sulle funzioni degli apparecchi e delle performance energetiche
- + Frigoriferi altamente professionali, presenti grazie ai nostri distributori in tutto il mondo



- + 40 years in the refrigeration field to reach "the cold management at the state of the art"
- + Main sectors: medical, pharmacies, hospitals, blood transfusion centers
- + Innovative, functional design
- + Latest generation electronics, highest control on the performance of the equipment and on power consumption
- + Highly professional refrigerators, worldwide present thanks to our distributors

fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER



PORTATILI

portable

+10°C -20°C



Appositamente realizzati per il trasporto di medicinali, vaccini e prodotti a temperatura controllata, i Frigoriferi portatili rispondono adeguatamente alle diverse esigenze sfruttando la possibilità di alimentazione in corrente continua per l'installazione a bordo di ambulanze ed autovetture. La loro compattezza, praticità, eleganza, unite all'alta capacità di coibentazione, garantiscono la qualità di un prodotto qualificato ad elevate prestazioni e ridotti.

Developed for the transport of medicines, vaccines and temperature controlled products, our portable Refrigerators adequately answer the most various requirements, taking advantage of continuous power supply in ambulances and on cars onboard installation. Their compactness, convenience and elegance, beside the high insulation performances, guarantee the quality of this qualified and low power consumption product.

Portatili Portable C29

29 lt
L 530
P 350
H 390



Portatili - Portable C41

41 lt
L 600
P 370
H 400



Portatili - Portable C65

65 lt
L 700
P 440
H 470



+ CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura interna ed esterna

realizzata con sistema rotomolding, materiale molto resistente, antiurto ed esteticamente piacevole. Isolamento in schiuma di poliuretano espanso, senza CFC.

L'evaporatore interno su tre lati assicura temperature regolabili a scelta tra +10°C e -10°C per i modelli C29 e C41, tra +10°C e -20°C per il modello C65.

+ Technical features

Internal and external structure

produced with a rotomolding system, a very resistant, shockproof and aesthetically pleasant material. Insulation in expanded polyurethane foam, without CFC.

The **internal evaporator** on three sides ensures adjustable temperatures between +10°C and -10°C for models C29 and C41, between +10°C and -20°C for C65 model.

Chiusura di sicurezza con chiave
Safety lock with key



Illuminazione interna
Internal light



La precisione e la regolazione della temperatura sono costantemente garantite dal termostato elettronico con lettura a display digitale.
Temperature regulation and precise setting are guaranteed by the electronic thermostat with digital display.



Cestello interno in filo di acciaio plastificato per facilitare il posizionamento e l'estrazione del materiale.
Internal basket made of plasticized steel wire so as to facilitate the positioning and the removal of the material.




Maniglie laterali in PVC a scomparsa per un facile trasporto.
Retractable lateral PVC handles for an easy transport.

PORTATILI portable

MODELLO MODEL

	C 29	C 41	C 65
Capacità lt (cu ft) - Capacity lt (cu ft)	29 (1,02)	41 (1,45)	65 (2,30)
Campo di temperatura - Temperature range	+10 -10°C	+10 -10°C	+10 -20°C
Temperatura ambiente di utilizzo - Ambient Temperature		SN	
Dimensioni esterne mm (LxPxH) - External dimension mm (WxDxH)	530x350x390	600x370x400	700x440x470
Peso Kg - Weight Kg	16	17	24
Controllore elettronico - Electronic controller	Display Elettronico - <i>Electronic Display</i>		
Sistema di allarme acustico e visivo - Acoustic and visual alarm system		✓	
Finitura Esterno/Interno - Outer/inner structure		Rotomolding	
Porta con cerniere - Hinged door		✓	
Serratura con chiave di sicurezza - Key locking		✓	
Maniglie - Handles		✓	
Illuminazione - Light		✓	
Cestello interno mm (LxPxH) - Internal basket; mm (WxDxH)	280x250x250		460x360x320
Spessore isolamento mm - Insulation thickness mm		40	
Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type		Statica - <i>Static</i>	
Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type		R134a	
Sbrinamento - Defrost		Manuale - <i>Manual</i>	
Voltaggio - Voltage (V) 50/60Hz		12/24 - 110/240	
Corrente assorbita nominale 12 Vcc (A) - Nominal consumption 12 Vcc (A)	2,58	2,58	3,68
Potenza assorbita nominale (W) - Nominal power consumption (W)	31	31	45

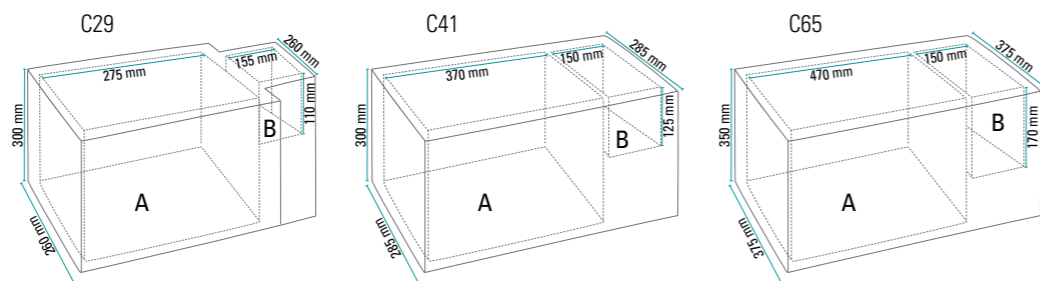

C29 - C41
280x250x250 h mm


C65
460x360x320 h mm

Dimensioni cestello
Baskets' dimensions

Dimensioni interne - Internal dimensions

TERMoeLETRICO thermoelectric

+7°C +65°C

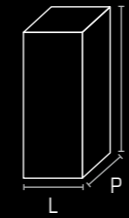

A fianco dei portatili a 12-24/110-240 V, Fiocchetti propone il T28, frigorifero portatile termoelettrico. Con funzionamento tramite il principio di Peltier, il T28 ha un costo contenuto e possiede una capacità di raffreddamento interno di circa 15/18°C inferiore alla temperatura dell'ambiente in cui viene utilizzato e di circa 38°C superiore nel caso di riscaldamento.

Beside its range of 12/24/110-240 V portable refrigerators, Fiocchetti proposes the T28, a thermoelectric portable Refrigerator. Its principle of construction makes it cost saving and therefore suitable for the customer who is looking for a semi-professional product. Working on Peltier principle, T28 is inexpensive and it has an internal cooling capacity of about 15/18°C lower than ambient temperature and of about 38°C higher in case of heating.

Al fine di ottimizzare le prestazioni del frigorifero termoelettrico e dei contenitori termici, su richiesta è disponibile l'accumulatore di freddo.

To optimize the performances, cold accumulators are available on request for the thermoelectric portable refrigerator and thermal containers.

Termoelettrico Thermoelectric T28

28 lt
L 385
P 270
H 485



Accumulatori di freddo
Ice packs

CONTENITORI TERMICI

thermal containers



I contenitori termici completano la gamma dei portatili. Questi prodotti sono adatti per il trasporto di materiale sanitario che non necessita di un controllo accurato della temperatura e non è particolarmente termolabile.

Thermal containers complete the portable refrigerators range. They are suitable for the transport of sanitary material not needing an accurate control of temperature and which is not particularly temperature sensitive.



16 lt.

26 lt.

30 lt.

48 lt.

MODELLO MODEL	TERMOELETRICO Thermoelectric		CONTENITORI TERMICI Thermal containers		
	T28	16	26	30	48
Campo di temperatura Temperature Range	+7 +65°C			X	
Capacità lt (cu ft) Capacity lt (cu ft)	28 (0,98)	16 (0,56)	26 (0,9)	30 (1,05)	48 (1,7)
Dimensioni esterne mm (LxPxH) External dimensions mm (WxDxH)	410x310x470	390x310x270	410x310x420	410x310x460	650x360x360
Dimensioni interne mm (LxPxH) Internal dimensions mm (WxDxH)	310x225x340	320x250x210	310x225x330	310x225x367	500x250x290
Selettore caldo/freddo Heating/refrigeration selector	Manuale - Manual			X	
Spessore isolamento mm (poliuretano espanso) Insulation thickness mm (foamed polyurethane)	20	20	25	30	30
Tipo di Refrigerazione Refrigeration Type	Effetto Peltier			X	
Voltaggio (V) Voltage (V)	12-230 (con adattatore - with adapter)			X	
Peso netto Kg Net weight Kg	4,9	2,5	3,4	3,6	3,4
Accessorio a richiesta Available accessory		Accumulatore di freddo - Ice pack			



fiocchetti

THE COLD MANUFACTURER

C.F. di CIRO FIOCCHETTI & C. s.n.c.
 Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) - ITALY
 tel. +39 0522 976232 - fax +39 0522 976028
www.fiocchetti.it - info@fiocchetti.it