



## idromed® 5 GS/PS

Αποτελεσματική συσκευή ιοντοφόρησης για τη θεραπεία της υπερίδρωσης.


Διατίθεται σε 2 εκδόσεις, συνεχούς (GS) ή παλμικού (PS) ρεύματος.

Η θεραπεία με ιοντοφόρηση συνεχούς (GS), ή παλμικού ρεύματος (PS) είναι μια διεθνώς επιστημονικά αναγνωρισμένη διαδικασία θεραπείας, η οποία είναι γνωστή εδώ και χρόνια.

Σε επιστημονικές μελέτες, η θεραπεία με τη Idromed® 5 PS έχει βαθμολογηθεί ως η βέλτιστη μέθοδος θεραπείας, χάρη στο νέο τύπο παλμικού ρεύματος, ιδιαίτερα για τους πολύ ευαίσθητους ασθενείς, τα παιδιά και τους νέους. Οι πιθανές παρενέργειες έχουν σαφώς μειωθεί. Τα χέρια ή τα πόδια μπορούν να απομακρυνθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας χωρίς το γνωστό φαινόμενο της «ηλεκτρικής εκκένωσης»

### Ειδικά χαρακτηριστικά

- Εύκολος και ασφαλής χειρισμός από ένα μόνο κουμπί ρύθμισης
- Μοντέρνο χειριστήριο με ευανάγνωστη οθόνη
- Αυτόματος ηλεκτρονικός περιοριστής ρεύματος και διακόπτης ασφάλειας για την αποφυγή «ηλεκτρικής εκκένωσης»
- Ηλεκτρόδια από πλάκα αλουμινίου για ομοιογενή πυκνότητα ρεύματος και για αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων
- Λειτουργία μέσω τάσης δικτύου (220V) χάρη στο νέα συστήματα ασφαλείας καθώς η λειτουργία μέσω στοιχείων συσσωρευτών (μπαταρίες) θα καθιστούσαν τη θεραπεία ασύμφορη.
- Ανθεκτική και σταθερή βαλίτσα, η οποία χρησιμοποιείται ως λεκάνη για τις θεραπείες.

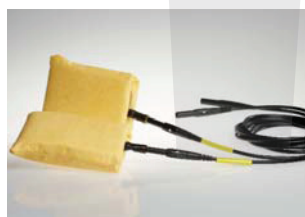

Κατ' επιλογή διατίθενται ειδικά ηλεκτρόδια (σπόγγοι) για θεραπεία των μασχαλών.  
Art.-no. 995100



Art.-no. idromed® 5 GS: 100 000  
Art.-no. idromed® 5 PS: 110 000

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (L x W x H):  
290 x 390 x 110 mm  
Διαστάσεις της μονάδας:  
(L x W x H): 210 x 120 x 70 mm  
Συνολικό βάρος: περίπου 2,5 kg  
(μονάδα, βαλίτσα και αξεσουάρ)  
Τροφοδοσία:  
230V / 50Hz / 20VA