


HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

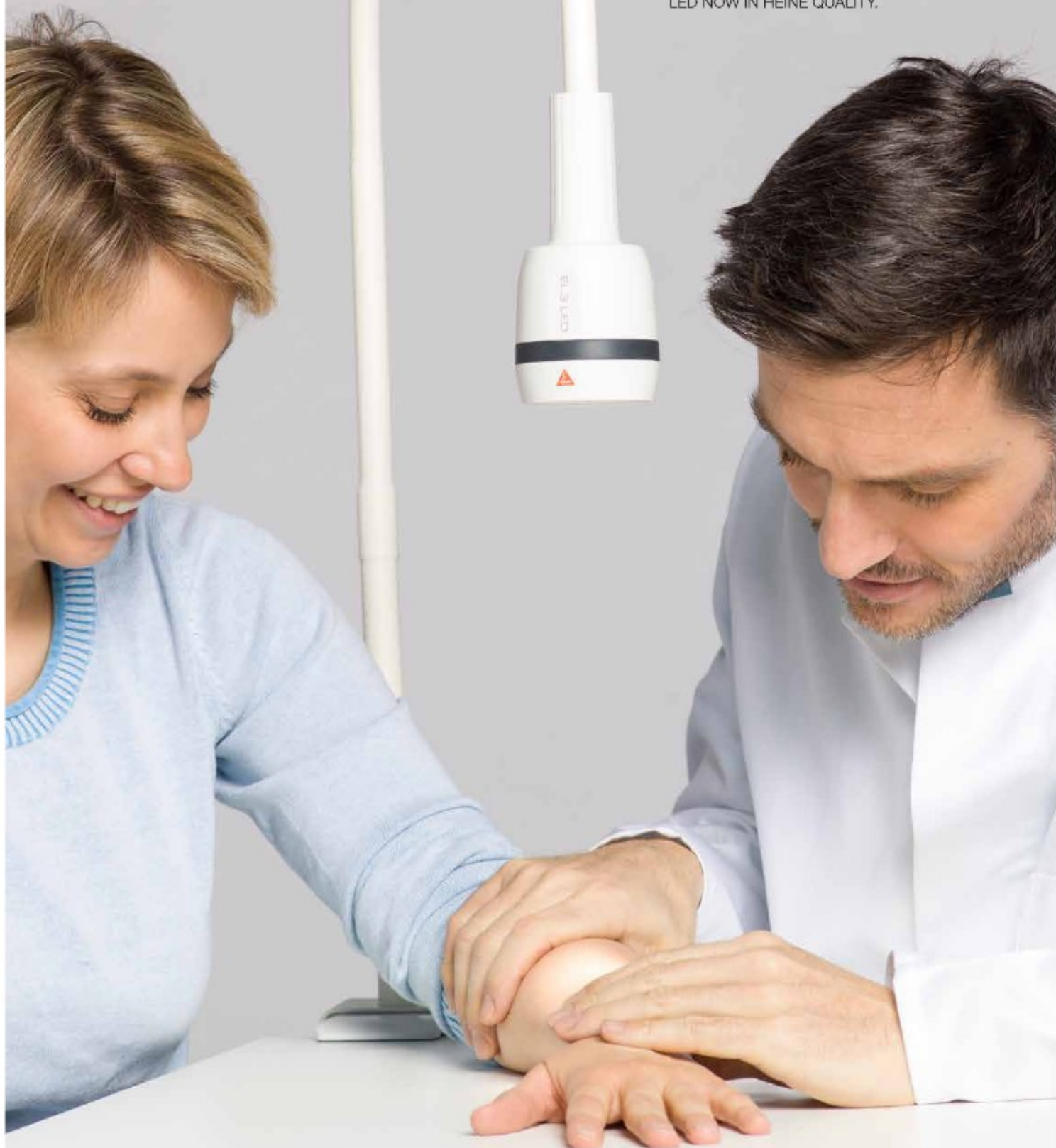

⚡ Φωτισμός Εξέτασης HEINE EL 3 LED
Απλά λαμπερός Φωτισμός LED



Η «ποιότητα» έχει γίνει ένας από τους περισσότερο πολυχρησιμοποιημένους και καταχρηστικούς όρους σήμερα σε μια προσπάθεια πώλησης προϊόντων. Λίγες εταιρείες, ωστόσο, μπορούν να προσδιορίσουν απτά την ποιότητα των προϊόντων τους ως προς τα οφέλη και την αξία για τον τελικό χρήστη. Στη HEINE ορίζουμε με σαφήνεια τα οφέλη της Ποιότητας HEINE όσον αφορά την Απόδοση, τη Λειτουργία και την Ανθεκτικότητα:

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απλά λαμπερός. Ο φωτισμός EL3 LED παρέχει λαμπερό (> 42,000 lux / > 350 lumen)*, χωρίς σκιές, φωτισμό, με ακρίβεια στο σημείο ενδιαφέροντος. * σε απόσταση εργασίας 30 cm

HQ (Heine Quality) LED. Το νέο πρότυπο στον φωτισμό LED που καθορίζει την βέλτιστη ένταση του φωτός, ομοιογένεια και χρωματική απόδοση για κάθε μεμονωμένη περίπτωση εξέτασης. Θερμοκρασία χρώματος: 5.000K, Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης (CRI) > 90 σε κλίμακα του 100, ειδικός δείκτης κόκκινου χρώματος: R9 > 80 εξασφαλίζει πραγματικό χρώμα ιστών για αξιόπιστη διάγνωση.

Φωτισμός Χωρίς Σκιές. Η συμπαγής κεφαλή φωτισμού (Ø περίπου 60 mm) επιτρέπει την εύκολη, ακριβή τοποθέτηση, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιπτώσεις εφαρμογής. Η βέλτιστη τοποθέτηση περιορίζει τις ανεπιθύμητες σκιές στο φωτιζόμενο πεδίο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Δεν απαιτεί συντήρηση ενώ καθαρίζεται εύκολα. Η συμπαγής σχεδίαση της κεφαλής επιτρέπει εύκολη και ασφαλή απολύμανση.

Βέλτιστη τοποθέτηση. Η ελαφριά κεφαλή και ο σταθερός «λαιμός χήνας» επιτρέπουν την εύκολη και διασητική ρύθμιση διατηρώντας τον φωτισμό ακριβώς στην απαιτούμενη θέση.

Πολλαπλές επιλογές στήριξης. Επίτοιχη στήριξη, σφιγκτήρας για επιτραπέζια στήριξη ή σε τροχήλατη βάση.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

5 Χρόνια Εγγύηση. Η HEINE δεν κάνει συμβιβασμούς στην κατασκευή ιατρικών οργάνων υψηλής ποιότητας. Η δέσμευσή μας για την κάθετη διάθρωση στην κατασκευή σημαίνει ότι ελέγχουμε όλες τις πτυχές της ποιότητας των οργάνων μας.

Θερμική Διαχείριση LED. Τα συστήματα φωτισμού LED απαιτούν θερμική διαχείριση ώστε να εξασφαλίζεται μακροχρόνια απόδοση και σταθερότητα του προϊόντος. Τα προσεκτικά επιλεγμένα και εφαρμοσμένα υλικά διάχυσης της θερμότητας στον Φωτισμό Εξέτασης EL 3 LED εγγυώνται σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των LED που κυμαίνεται έως 30.000 ώρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτισμός Εξέτασης EL 3 LED με Επίτοιχη στήριξη

J-008.27.011

Φωτισμός Εξέτασης EL 3 LED με σφιγκτήρα για επιτραπέζια στήριξη [01]

J-008.27.013

Φωτισμός Εξέτασης EL 3 LED με μεταλλική τροχήλατη βάση [02]

J-008.27.014



[01]



[02]

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. © 2015 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. A-000.00.263 e 05/15.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ:
Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001/1348 και τον νόμο για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

