

wellion® BONAHbA1c

Ο αναλυτής Wellion BONA HbA1c είναι ένας μικρός φορητός αναλυτής HbA1c. Επιτρέπει σε όλους τους επαγγελματίες υγείας μια γρήγορη και εύκολη μέτρηση HbA1c. Κάθε σημείο, από την διεξαγωγή της μέτρησης μέχρι την αποθήκευση των υλικών διευκολύνει την ακριβή παρακολούθηση της μέσης τιμής γλυκόζης στην κλινική πράξη. Συνοδευόμενο με φωνητική λειτουργία και ηχητικούς τόνους, η διεξαγωγή μετρήσεων με τον Wellion BONA θα ενσωματωθεί εύκολα στην καθημερινότητα δίνοντας γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα μέσα σε πέντε λεπτά. Η φορητή ιατρική συσκευή χρειάζεται μόνο τρία μικρολίτρα αίματος για την μέτρηση της HbA1c με ακρίβεια CV<3%!



Η μακρά εικόνα της γλυκόζης αίματος σε 5 μόνο λεπτά

- Μόνο 5 λεπτά σε τρία βήματα
- Φωνητική λειτουργία και ηχητικούς τόνους σε όλα τα βήματα
- Διεθνή % NGSP, mmol/mol IFCC HbA1c και μονάδες eAG
- Αυτόματη αποθήκευση αποτελεσμάτων μετρήσεων, ημερομηνίες, χρόνος και αρίθμηση

Φωνητική λειτουργία και φορητότητα για εύκολη μέτρηση HbA1c

- Φορητός, χειρός, για ευελιξία
- Ακρίβεια με μεθοδολογία NGSP και IFCC για διπλή εξασφάλιση
- Υψηλή ακρίβεια με CV<3% με μόλις 3 μικρολίτρα αίματος
- Ελεύθερο-παρεμβολών: έκδοχα Hb, ασταθή HbAs, άλλες ουσίες

Ελάχιστη προσπάθεια, τέλειο, αξιόπιστο αποτέλεσμα!


- Αποθήκευση αναλυτή & ταινιών σε θερμοκρασία δωματίου
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Λειτουργία Bluetooth
- Δωρεάν συμβατό λογισμικό HbA1c στο wellion.at

Ο αναλυτής χειρός Wellion BONA HbA1c πληρεί όλες τις απαιτήσεις που απαιτούνται στην καθημερινή ιατρική πρακτική και πείθει με την απλότητα και την ακρίβεια του.

Αρχή μεθοδολογίας:	χρωματογραφία συγγένειας βορονικού
Εύρος μετρήσεων:	4.0%—14.0% NGSP 20—130mmol/mol IFCC
Δείγμα:	Τριχοειδικό ή φλεβικό (αντιπηκτικά EDTA) αίμα
Μέγεθος δείγματος:	~ 3μl
Χρόνος μέτρησης:	5 λεπτά
Μονάδα αποτελέσματος:	NGSP: % IFCC: mmol/mol eAG: mmol/L ή mg/dL
Κωδικοποίηση:	με τσιπ βαθμονόμησης, δεν απαιτείται επιπλέον κωδικοποίηση
Μνήμη:	1000 αποτελέσματα
Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες:	Φωνητική λειτουργία Bluetooth Ανίχνευση λάθους
Παροχή ενέργειας	επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 3.7V
Θύρα:	micro USB
Εκτύπωση:	Συμβατό με εξωτερικό θερμικό εκτυπωτή
Μετρήσεις με πλήρως φορτισμένη μπαταρία:	~ 800
Διαστάσεις (χιλ.) & βάρος (γραμ.):	120 x 60 x 20 χιλ, ~100 γρ (χωρίς μπαταρία) Μέγεθος οθόνης: 55 x 40 χιλ
Ακρίβεια (CV):	CV <3%
Ακρίβεια & Πιστοποιητικά:	Πιστοποιητικό IFCC Πιστοποιητικό NGSP



Accurate Results

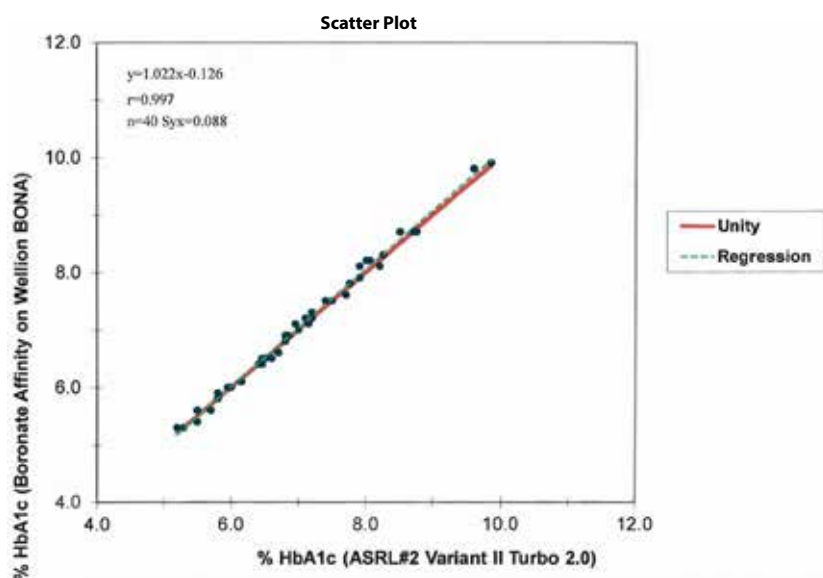

Reference: NGSP method comparison evaluation report for Wellion® BONA HbA1c-analyzing system versus HPLC Variant II Turbo 2.0



MEDICAL.GR
Dedicated to Health