

KANMED^o BABYWARMER

Άριστη ανάπτυξη με έναν ασφαλή και απλό τρόπο.

Για πρόωρα, νεογγέννητα μωρά και βρέφη.





Άριστη ανάπτυξη με έναν
ασφαλή και απλό τρόπο.



ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΝΜΕD BABYWARMER.

Για τα τελευταία 20 χρόνια περισσότερα από ένα εκατομμύριο μικρά και πρόωρα μωρά θερμαίνονταν αποτελεσματικά στο Στρώμα Νερού Kanmed.

- Το Kanmed BabyWarmer έχει σχεδιαστεί για να κρατά τα πρόωρα, νεογέννητα μωρά και βρέφη τέλεια ζεστά και έχει ερευνηθεί διεξοδικά.
- Σαν αποτέλεσμα, έχει αποδειχθεί ότι τα μωρά αποχωρούν από την θερμοκοιτίδα γρηγορότερα, χαλαρώνουν, κοιμούνται καλύτερα και αναπτύσσονται άριστα.
- Το απαλό ζεστό Στρώμα Νερού Kanmed και οι Φωλιές Μωρών Kanmed παρέχουν παρόμοια θέρμανση και άνεση όπως το δέρμα στην φροντίδα με δέρμα Kangaroo (Καγκουρώ).
- Το Kanmed BabyWarmer θα μπορούσε να οδηγήσει σε γρηγορότερο εξητήριο από το νοσοκομείο και ως εκ τούτου σε μείωση των νοσηλείων.
- Το Kanmed BabyWarmer είναι εύκολο και ασφαλές στη χρήση και αρέσει πολύ στα μωρά, στους γονείς και στο προσωπικό του νοσοκομείου.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΝΜΕD

Το ζεστό νερό περιέχει πολύ ενέργεια. Ως εκ τούτου το μωρό δεν μπορεί να δροσίσει το νερό, έτσι η θερμοκρασία του δέρματος του μωρού προσεγγίζει τη θερμοκρασία του νερού – καθιστώντας το Στρώμα Νερού τον αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο τρόπο για να διατηρείται ένα μωρό στους 37°C. Το Στρώμα Νερού Kanmed δημιουργεί μια θερμική ισορροπία με το νερό, έτσι ώστε το μωρό να μπορεί να αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς του σε ό,τι είναι σημαντικό – την βέλτιστη ανάπτυξη, αντί να χρησιμοποιεί την ενέργεια προσπαθώντας να κρατηθεί ζεστό.

Ένα άλλο πλεονέκτημα – σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το Στρώμα Νερού θα κρατήσει το μωρό ζεστό με ασφάλεια έως δύο ώρες, καθώς το νερό κρυώνει αργά.

“Μόνο ένα ζεστό, απαλό Στρώμα Νερού μπορεί να αντικαταστήσει την αποτελεσματικότητα της θέρμανσης μιας σύγχρονης θερμοκοιτίδας”.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ KANMED

Το σύστημα Θέρμανσης Μωρού Kanmed είναι πολύ ασφαλές και εύκολο στη χρήση. Όλα τα τμήματά του είναι ύψιστης ποιότητας και εξασφαλίζουν μακρά και χωρίς προβλήματα διάρκεια ζωής. Εάν χρησιμοποιείται σωστά, εξασφαλίζει την βέλτιστη θέρμανση του μωρού σας.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΤΟ ΝΕΟ KANMED BABYWARMER

Εμπειρία 20 χρόνων βρίσκεται πίσω από το νέο σύστημα Kanmed BabyWarmer που φέρει σήμανση Ce.

Το νέο BabyWarmer έχει 3 δυνατότητες θέρμανσης κάτω από το σώμα χρησιμοποιώντας την ίδια Μονάδα Ελέγχου και Επιφάνεια θέρμανσης.

- 1 Το απαλό, ζεστό Στρώμα Νερού Kanmed.
- 2 Ένα θερμό, μαλακό, ειδικό Στρώμα γέλης.
- 3 Ένα θερμό Στρώμα αφρού.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε έναν πρότυπο αισθητήρα δέρματος YSI για να ελέγχετε την θερμοκρασία του μωρού.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΩΡΟΥ

Στρώμα νερού: Όλα τα μωρά από 800 g




Στρώμα γέλης: Βρέφη από 1500 g



Στρώμα αφρού: Για την άνετη θέρμανση των μωρών



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

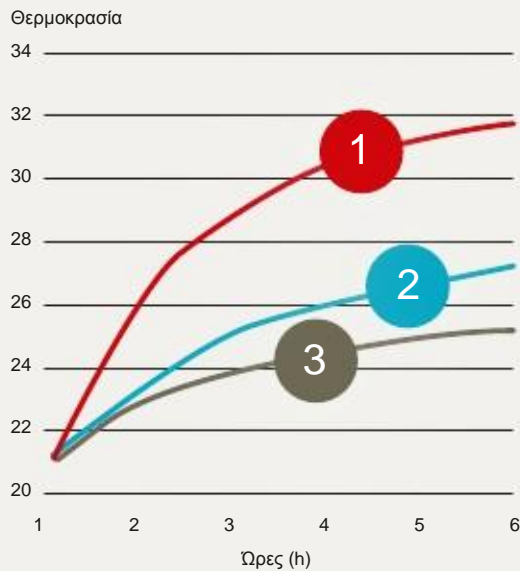

500 ml φιάλη νερού

- Στρώμα Νερού Kanmed
- Στρώμα Γάλης Kanmed
- Στρώμα Αφρού Kanmed

Για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα θέρμανσης τοποθετήθηκε μια πλαστική φιάλη με 500 ml νερό σε κάθε τύπο στρώματος όταν ήταν σε σταθερή κατάσταση σε 37° C. Η φιάλη καλύφθηκε με ένα διπλό στρώμα βαμβακερής πετσέτας. Στη συνέχεια καταγράφηκε η αύξηση της θερμοκρασίας στο νερό. Όπως φαίνεται ανωτέρω στο Στρώμα Νερού έχει την υψηλότερη μεταφορά ενέργειας και γι' αυτό είναι το αποτελεσματικότερο σύστημα θέρμανσης.

Η αποτελεσματικότητα του στρώματος νερού τεκμηριώθηκε σε πολλές δημοσιευμένες μελέτες.

Οι αναφορές περιλαμβάνουν: Ph Gray και άλλοι, Πανεπιστήμιο Queensland, Αυστραλίας. Κούνια νοσηλείας χρησιμοποιώντας στρώμα γεμισμένο με θερμό νερό ... (2004).

Acta Paediatrica 93:308-310 2004-03-18.

Πρόληψη των βλαβών από το κρύο σε πρόωρα βρέφη. Ragnar Tunell. Ass. Ομότιμος καθηγητής στην Στοκχόλμη.

ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ



Μπορείτε να αρχίσετε να θερμαίνετε ένα πρόωρο μωρό στο σύστημα θέρμανσης Kanmed BabyWarmer από τη στιγμή που το μωρό είναι σταθερό, αλλά χρειάζεται ακόμη ελάχιστη κλινική παρέμβαση, όπως ελαφρά αναπνευστική υποστήριξη!

Επιλέξτε έναν τύπο στρώματος που είναι κατάλληλος για τις ανάγκες του μωρού.

Τοποθετήστε την Επιφάνεια θέρμανσης στη θήκη κάτω από το στρώμα. Τοποθετήστε το στρώμα στη Φωλιά Μωρού Kanmed BabyNest.

Πιέστε έναρξη και ρυθμίστε την θερμοκρασία.

Όταν γίνει πράσινο το χαμόγελο στην Μονάδα Ελέγχου, η θερμοκρασία του στρώματος είναι εντάξει για το μωρό.

ΟΦΕΛΗ

- Προτρέπει την βέλτιστη ανάπτυξη
- Εύκολο στη χρήση και τον καθαρισμό για το προσωπικό
- Σημαντική μείωση του κόστους σε σύγκριση με τη χρήση μιας θερμοκοιτίδας

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ ΚΑΝΜΕΔ

Τα διαφορετικά μεγέθη φωλιών, οι αναλώσιμες φωλιές, τα στρώματα νερού, κλπ. κάνουν εύκολη την προσαρμογή της χρήσης του συστήματος Θέρμανσης Μωρού στις ανάγκες του μωρού και στην ρουτίνα του νοσοκομείου.



ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΝΜΕΔ BW3-001 ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

BW3-020 Μονάδα Ελέγχου

BW-50-003 Στρώμα Νερού

BW-50-029-1 μία φιάλη αντιαλγικού

BW3-003 Επιφάνεια θέρμανσης χαμηλής τάσης

BW-50-025 Φωλιές Μωρού (2τεμ)

699-1171 Καλώδιο Ρεύματος

BW3-0xx Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Παραγγίλτε προαιρετικά Στρώμα Γέλης ή Αφρού.



ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ BW3-020

Νέα σχεδίαση με εύκολη στην ανάγνωση οθόνη ενδείξεων.

Το νέο σύστημα θέρμανσης νερού σας προσφέρει 3 μεθόδους θέρμανσης κάτω από το σώμα χρησιμοποιώντας την ίδια Μονάδα Ελέγχου και Επιφάνεια θέρμανσης.

1. Το απαλό, ζεστό Στρώμα Νερού Kanmed

2. Ένα θερμό, μαλακό, ειδικό Στρώμα Γέλης

3. Ένα θερμό Στρώμα Αφρού

Προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε έναν πρότυπο αισθητήρα δέρματος YSI για να ελέγχετε τη θερμοκρασία του μωρού. Μπορεί να σταθεί μόνη της, να κρεμαστεί με τη λαβή της ή να τοποθετηθεί σε ορθοστάτη. Τροφοδοτείται από 100–240 V AC ή 12–24 V DC. Έχει βάρος 1,5 kg, διάμετρο 14 cm, ύψος 21 cm. Μέση κατανάλωση ισχύος 15W.



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ BW3-003

Χαμηλής τάσης 24 V DC, 50W, υδατοστεγές και εύκολο στον καθαρισμό. Δεν έχει πιθανά επιβλαβή μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία – ένα μοναδικό χαρακτηριστικό των Kanmed. Τέσσερις ολοκληρωμένοι αισθητήρες παρακολουθούν συνεχώς την απόδοση του συστήματος και τις θερμοκρασίες. Μήκος: 58 cm, Πλάτος: 25 cm, Πάχος: 2 mm



ΚΑΘΕΤΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ BW3-0837

Για να τοποθετήσετε την Μονάδα Ελέγχου BW3 σε έναν κάθετο ή οριζόντιο ορθοστάτη.

KANMED^o BABYWARMER



WATER MATTRESSES, GENERAL INFORMATION

Όλα τα Στρώματα Νερού Kanmed είναι κατασκευασμένα από γερό, μαλακό EVA πλαστικό. Είναι κατασκευασμένα με τοιχώματα απόσβεσης που μειώνουν τις κινήσεις του νερού, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν ευέλικτα αρκετά για να ανταποκρίνονται στην κίνηση του μωρού. Περιλαμβάνεται μια φιάλη αντιαλγικού, το οποίο είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι διατηρεί το νερό καθαρό για έως ένα έτος.

ΣΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ BW-50-003

Αυτό είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο Στρώμα Νερού. Όταν γεμίσει ως την ένδειξη στάθμης στο στρώμα, περιέχει περίπου 4-4,5 λίτρα νερού. Μήκος: 60 cm, Πλάτος: 27 cm

ΣΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΑ BW-50-015


Ειδικό Στρώμα Νερού για δίδυμα και μεγαλύτερα μωρά. Μπορεί να διατηρείται ζεστό χρησιμοποιώντας μόνο μία Επιφάνεια θέρμανσης. Όταν γεμίσει ως την ένδειξη στάθμης στο στρώμα, περιέχει περίπου 10 λίτρα νερού. Μήκος: 60 cm, Πλάτος: 60 cm

BW-50-010 WATER MATTRESS FOR KANMED BABYBED

special Water Mattress that covers most of the bed surface of the Kanmed BabyBed (BB-1 or BB-3) it can be kept warm using only one heating Pad. When filled to the level mark on the mattress it contains about 9 litres of water. length: 60 cm, Width: 40 cm

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ YSI BW3-099

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας του δέρματος συνδέεται στο εμπρός τμήμα της Μονάδας Ελέγχου. Η μετρούμενη θερμοκρασία εμφανίζεται αυτόματα με υψηλά και χαμηλά προειδοποιητικά σήματα. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν ελέγχει την θέρμανση του μωρού.

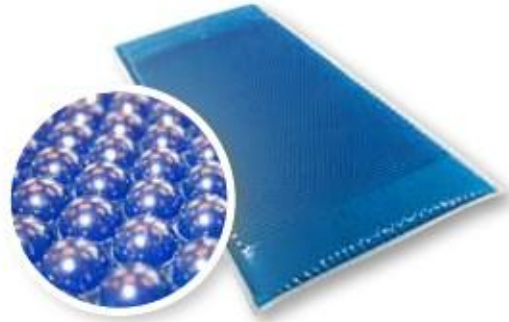

GE-602815 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΕΛΗΣ ΜΕ ΘΗΚΗ

Η Επιφάνεια γέλης Kanmed είναι ειδικά κατασκευασμένη για το σύστημα θέρμανσης μωρού BW3.

Η Επιφάνεια γέλης έχει μια πολύ καλή κοκκώδη αίσθηση που την κάνει απαλή και άνετη για να ξαπλώνει το μωρό. Έχει μια θήκη για να τοποθετείται η Επιφάνεια θέρμανσης. Εάν για κάποιον λόγο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται το Στρώμα Νερού, η Επιφάνεια γέλης Kanmed είναι μια ιδιανική επιλογή. Ταιριάζει στις Φωλιές Μωρού BW-50-025. 60 x 28 x 1,5 cm



ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ BW3-203

Αυτό το πολύ μαλακό και εύκολο στον καθαρισμό Στρώμα Αφρού προορίζεται για σχεδόν τελειόμηνα βρέφη και για άνετη θέρμανση. Δεν είναι σχεδιασμένο για την προώθηση της ανάπτυξης στα πρόωρα μωρά. Έχει μια θήκη για την τοποθέτηση της Επιφάνειας θέρμανσης. 60 x 28 cm

ΑΝΤΙΑΛΓΙΚΟ BW-50-029

Συνιστάται να χρησιμοποιείται με τα Στρώματα Νερού ως κλινικά αποδεδειγμένο για την πρόληψη του σχηματισμού άλγης και βακτηρίων μέσα στο Στρώμα Νερού. Διατηρεί το νερό καθαρό για ένα έτος. Πρέπει να προστίθεται κάθε φορά που αλλάζει ή συμπληρώνεται το νερό. Συσκευασία των 20 φιαλών.



KANMED^o BABYWARMER



ΦΩΛΙΕΣ ΜΩΡΩΝ BW-50-025 ΚΑΙ

BW-50-025-XL KANMED

Η Φωλιά Μωρού Kanmed είναι μια επαναχρησιμοποιούμενη φωλιά ενός τεμαχίου. Απλώς σύρετε το επιλεγμένο Στρώμα και την Επιφάνεια Θέρμανσης μέσα στη θήκη. Η Φωλιά Μωρού προορίζεται για να διευκολύνει στην διόρθωση της φυσιολογικής θέσης και για να παρέχει ένα ζεστό περιβάλλον γύρω από το Μωρό. Θερμοκρασία πλύσης: 60° C. Υλικό Καλύμματος: Βαμβάκι, Γέμιση: Ίνες από Πολυεστέρα

Μήκος Φωλιάς Μωρού: 65 cm, Πλάτος: 35 cm,

Ύψος: 6 cm, Εσωτερικό τμήμα: 40 cm

BW-50-025 Φωλιά Μωρού μπλε

BW-50-025-P Φωλιά Μωρού ροζ

BW-50-025-y Φωλιά Μωρού κίτρινη

ΦΩΛΙΑ ΜΩΡΟΥ BW-50-025-XL

Η Φωλιά Μωρού Kanmed XL είναι για μεγαλύτερα μωρά έως

4500 g, Μήκος Φωλιάς: 65 cm, Πλάτος: 35 cm,

Ύψος: 6 cm, Εσωτερική Διάμετρος: 60 cm



ΦΩΛΙΑ ΜΩΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΑ BW-50-027

Φωλιά για να ταιριάζει το Στρώμα Νερού για Δίδυμα, αρ. είδους: BW3-015, ή για δύο πρότυπα Στρώματα Νερού. Μήκος: 65 cm, Πλάτος: 55 cm, Ύψος: 5 cm. (Μόνο σε μπλε χρώμα)



BW-50-250 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΩΛΙΑΣ ΜΩΡΟΥ

Πολύ ωραίο και μαλακό, μη υφασμένο υλικό που μορφοποιείται εύκολα μέσα στη Φωλιά Μωρού. Έχει μια υδατοστεγή κάτω πλευρά. Προορίζεται για να προστατεύει είτε την αναλώσιμη φωλιά ή τις επαναχρησιμοποιούμενες φωλιές. Μήκος: 60 cm, Πλάτος: 85 cm. Κουτί των 100 τεμ.



ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΦΩΛΙΑ ΜΩΡΟΥ BW-50-200

Κατασκευασμένη από μη υφασμένο υλικό. Μήκος: 65 cm, Πλάτος: 35 cm, Εσωτερικό τμήμα: 40 cm. Κουτί των 10 τεμ.




ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BW3-007

Για να συνδέετε την Μονάδα Ελέγχου σε μια μπαταρία αυτοκινήτου ή ένα παρόμοιο τροφοδοτικό 12 V DC.

Εξοπλισμένο με ένα γενικό βύσμα αναπτήρα αυτοκινήτου για χρήση σε οχήματα μεταφοράς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το σύστημα Θέρμανσης Μωρού Kanmed BabyWarmer και Kanmed BabyBed σας επιτρέπει να μετακινήτε ένα πρόωρο μωρό από την θερμοκοιτίδα σε ένα πρώιμο στάδιο και να ξεκινάτε το πολύ σημαντικό δεσμό μητέρας παιδιού χρησιμοποιώντας δέρμα Kangaroo (Καγκουρώ) στην φροντίδα του δέρματος.

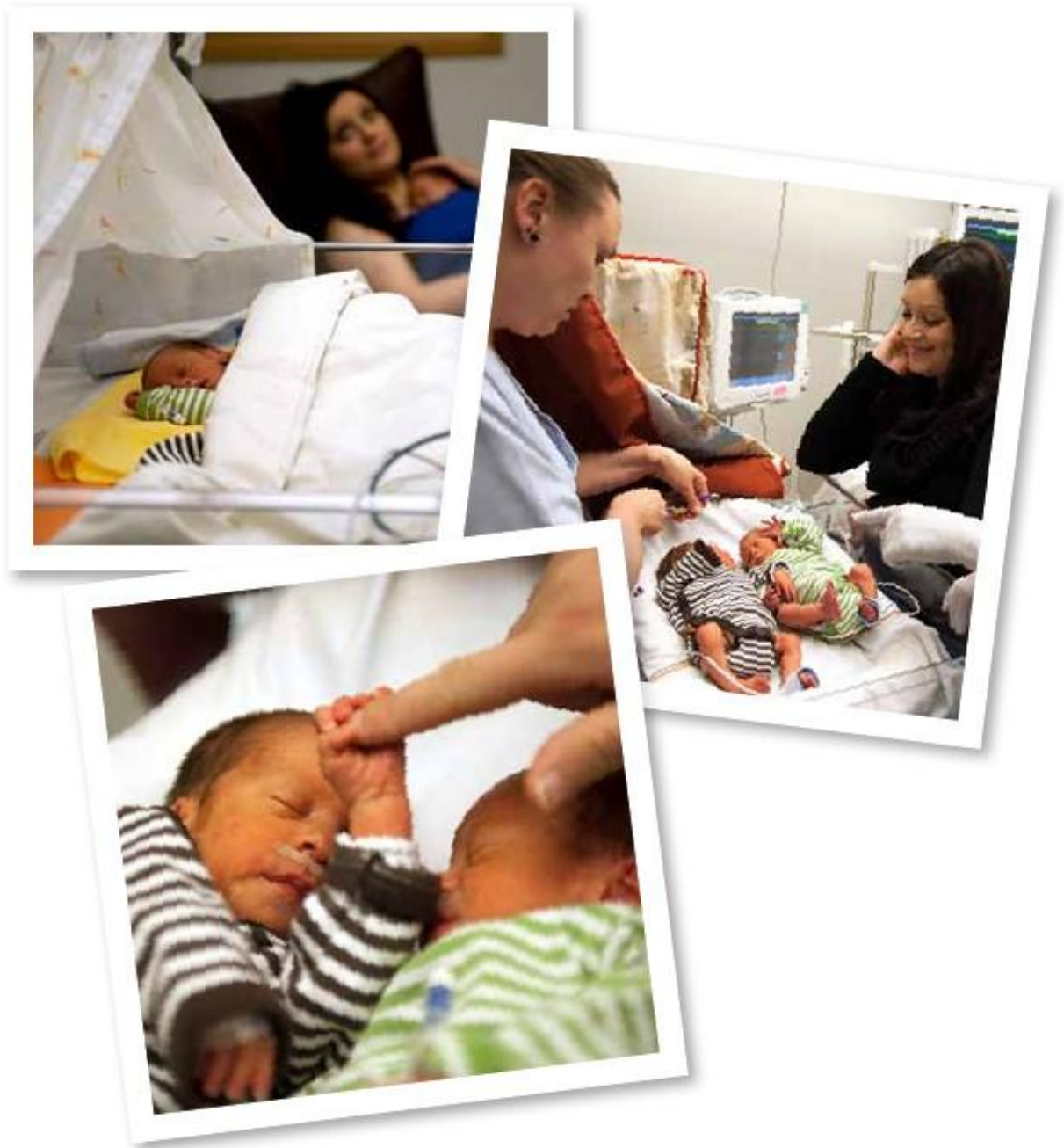

KANMED ^o **BABYWARMER**

Kanmed AB
Gårdsfogdevägen 18B | SE-168 66 BROMMA | SWeden
Τηλ. +46 8 56 48 06 30 | Fax +46 8 56 48 06 39
info@kanmed.se | www.kanmed.se