



Poggiatesta regolabile
Adjustable headrest
Tête réglable



Bracciolo prelievo regolabile
Adjustable blood donor armrest
Accotoir pour prise de sang réglables



LORY

Poltrona prelievi Blood donor chair Fauteuil pour prise de sang



Dal modello Expedia è stata sviluppata la poltrona prelievi modello **Lory** ampliando le funzionalità della poltrona O.R.L.

Sono stati variati i braccioli che sono removibili, completamente regolabili in altezza, girevoli ed estensibili.

Le qualità tecniche sono esattamente quelle della poltrona Expedia, in aggiunta quando la poltrona è in posizione "letto", lo schienale si abbassa in modo tale da effettuare il movimento trend a mezzo di molla meccanica.

La sezione gambe, imbottita in unico pezzo così da formare in completa estensione la posizione totale "letto".

Basing on the Expedia model, we have developped the blood donor chair, model **Lory**, improving the functionalities of O.R.L. chair.

Arms rest have are now removables, with adjustable height, rotating and extensibles.

Technical features are exactly the same of expedia model, but when the chair is in "bed" position, the back rest descends so to make the trend movement by a mechanical spring.

Leg section is padded and it is a single piece so to make, when extended, the "bed position".

Sur la base du Mod. Expedia, nous avons produit le fauteuil pour prise de sang modèl **Lory**.

Nous avons modifié les accotoirs qui sont: amovibles, complètement réglables en hauteur, tournants et extensibles.

En plus quand le fauteuil est en position "lit" le dossier se baisse de manière d'avoir la position trend par ressort mecanique. Les jambières sont un seul pièce rembourré ainsi que en complète extension, le fauteuil devient "lit".




LORY

Poltrona prelievi
Blood donor chair
Fauteuil pour prise de sang





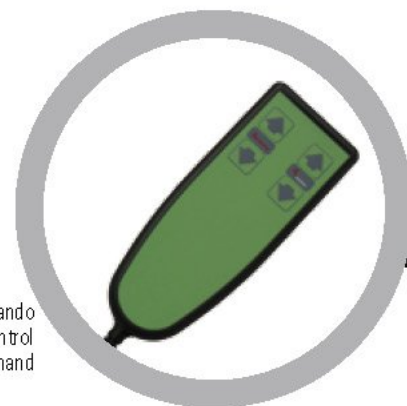

Telecomando
Hand keyboard control
Telecommand




Ruote con freno
Wheel with brake
Roue avec frein



Pedaliera
Pedal keyboard
Command Pédalier

LORY

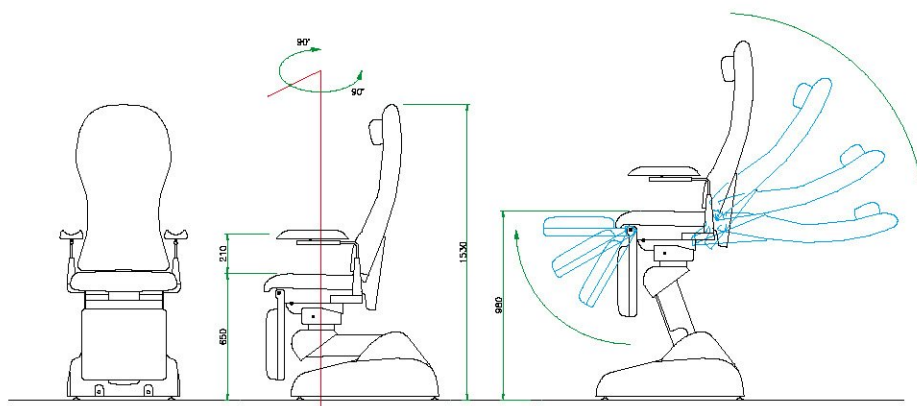

Poltrona prelievi
Blood donor chair
Fauteuil pour prise de sang



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	DONNÉES TECHNIQUES
Tensione di alimentazione	Feeding tension	Tension d'alimentation 230 V - 50 Hz
Motori bassa tensione	Motor power	Moteurs basse tension 24 V
Spinta motore di sollevamento	Lifting motor push	Poussée moteur d'élévation 6000 N
Spinta molla a gas schienale	Backrest gas spring push	Poussée moteur du dossier 800 N
Spinta motore schienale	Backrest motor push	Poussée ressort a gaz du dossier 6000 N
Capacità di sollevamento	Lifting capacity	Portée de soulèvement 180 kg
Potenza massima	Maximum power	Puissance max 120 VA
Protezione da fusibile	Fuse	Fusible 1,6 + 6 A
Con grado di protezione	With protection	Avec protection IP44
Peso della poltrona	Chair weight	Poids du fauteuil 75 kg
Lunghezza basamento	Base length	Lougueur de la base (carter) 580x740 mm