


Trasduttore Flowline Connect

Software Flowline Connect

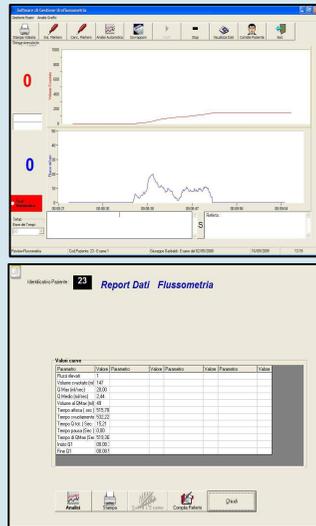

IL FLOWLINE CONNECT E' FORNITO NELLA SEGUENTE CONFIGURAZIONE :

TABLET TOUCH SCREEN 7"-10" (**SOLO SU RICHIESTA NON COMPRESO**)

CHIAVETTA CON TECNOLOGIA WIRELESS
SOFTWARE UROFLUSSOMETRIA (CD O CHIAVETTA USB)

TRASDUTTORE PLASTIFICATO CON PORTA IMBUTO DA 1 LITRO E BEKER SUPPORTO PER REGOLAZIONE IN ALTEZZA

ALIMENTATORE 12V (PER FUNZIONAMENTO E CARICA BATTERIA)

MANUALE IN ITALIANO

VALIGETTA PER IL TRASPORTO

MEDICAL
EV.SERVICE ITALIA
EQUIPMENT



ultima produzione e novità del 2015. Il Flowline Connect rappresenta e soddisfa le necessità di tutti i professionisti che vogliono avere uno strumento versatile non ingombrante e di ultima generazione.

Tecnologia Touch Screen su Tablet portatile da 7-10-12" alta definizione o Personal computer Lap Top Desk Top Trasduttore Wireless con tecnologia EV.SERVICE ITALIA proprietaria, posizionamento fino a 50-80 m

Il trasduttore è ergonomico compatto plastificato può essere pulito facilmente e completamente smontabile per essere trasportato nella sua valigetta dedicata. Funzionamento a batteria al lithio da 3,6V ricaricabile per poter avere sempre a disposizione lo strumento in qualsiasi situazione.

Il Flowline Connect è semplice da usare, le funzioni del software sono automatizzate e rendono il suo utilizzo assolutamente accessibile anche a coloro che non sono esperti di informatica.

Il Flowline Connect ha un trasduttore che mantiene sempre la taratura nel tempo e facilmente controllabile.

Collega la chiavetta proprietaria, accendi il Tablet e sei pronto per effettuare l'esame. Il Report è personalizzabile e può essere stampato su vari supporti, dalla stampante classica Laser, a getto d'inchiostro sino a quelle portatile con carta termica. Di base il report si converte il file PDF e può essere inviato via e-mail o trasferito su chiavetta USB o stampato.

EV.SERVICE ITALIA SRL

Adress office Via Guido Rossa N° 68
40033 Casalecchio di Reno (Bologna) Italy
Zona Industriale
Stabilimento Produzione Assistenza Tecnica
Indirizzo 4

Phone:: + 39 51 728836
Fax: + 39 51 7417254
mail: info@evserviceitalia.it

MEDICAL
EV.SERVICE ITALIA
EQUIPMENT


Uroflowmeter Wireless Flowline Connect Vers. 2.0

Tecnologia all'Avanguardia per aiutarVi ad aiutare gli altri..!!



For contact
Phone + 39 51 728836

Particolari Flowline Connect

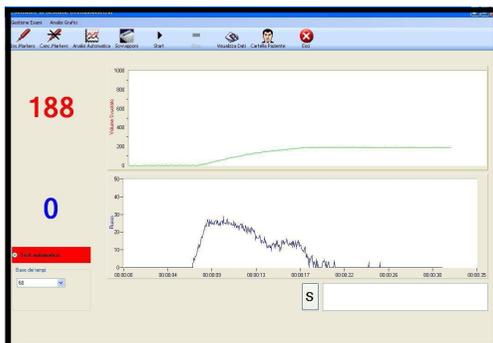

Parametri Flowline Connect

Volume Svuotato

(da 0 a 1000 ml)

Flusso Massimo

(da 0 a 50 ml/sec regolabile da tastiera)

possibilita' di cambiare la scala sia del Volume che del Flusso per avere maggiore chiarezza dei tracciati e vedere i particolari dell'andamento delle curve)

Flusso Medio

Volume residuo (si aggiunge manualmente)

Tempo al Flusso Massimo

(espresso in secondi)

Tempo di Svuotamento

(espresso in secondi)

Tempo di Flusso

(espresso in secondi)

Diagnosi secondo Siroky

(Diagnosi del grado di Ostruzione Dubbio-ostruito-non ostruito)

Cartella Clinica

Archivio

Statistiche

Report Dati

Stampa del Report

Altre funzioni...

Analisi Automatica

Inserimento Marker

Sovrapposizione Tracciati

Situazione Paziente

Confronto Grafici nel Tempo

MEDICAL
EV.SERVICE ITALIA
EQUIPMENT



EV.SERVICE ITALIA SRL

office Via Guido Rossa N° 68
40033 Casalecchio di Reno (Bologna) Italy
Zona Industriale
Stabilimento Produzione Assistenza Tecnica

: + 39 51 728836

Fax: + 39 51 7417254

mail: info@evserviceitalia.it

Web Site : www.evserviceitalia.org