




- Οι δοκιμές εκτελούνται μόνο με τα συστατικά και τα ρυθμιστικά διαλύματα που παρέχονται με το κιτ δοκιμών.
- Αντιμετωπίστε το δείγμα όπως περιγράφεται εδώ. Ακατάλληλο ή κακομεταχειρισμένο υλικό δείγματος μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα.
- Φυλάξτε τα κιτ δοκιμών μακριά από παιδιά για να μειώσετε τον κίνδυνο να πιουν κατά λάθος τα παιδιά τα ρυθμιστικά διαλύματα ή να καταπιούν μικρά μέρη.
- Τα κιτ δοκιμών που έχουν λήξει ή έχουν ανοιχθεί δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Το σετ δοκιμών δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο μισή ώρα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.

Ι ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

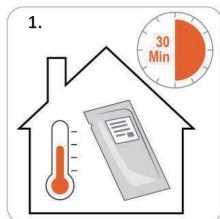


Αφήστε όλα τα συστατικά του κιτ δοκιμών να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου (το πολύ 15 έως 30 °C) 30 λεπτά πριν από την έναρξη της δοκιμής.




Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας.




Έχετε έτοιμο ένα ρολόι ή χρησιμοποιήστε ένα χρονομέτρο.

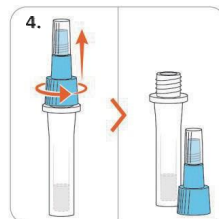

Ξεβιδώστε το μπλε καπάκι από το σωλήνα εξαγωγής.

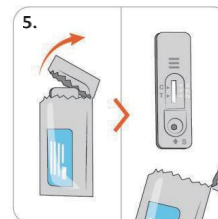


Αποσυσκευάστε την κασέτα δοκιμής και χρησιμοποιήστε την αμέσως.


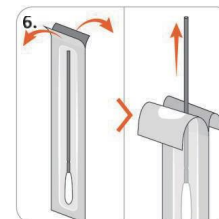


Αποσυσκευάστε το στύλεο.


ΙΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

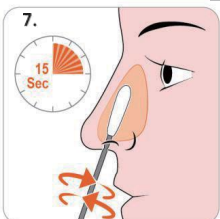


- Εισάγετε το στύλεο σε βάθος περίπου 2-2,5 cm στο ένα ρουθούνι. Το απορροφητικό άκρο πρέπει να είναι πλήρως βυθισμένο στη ρινική κοιλότητα.
- Περάστε την μπατονέτα κατά μήκος του εσωτερικού τοιχώματος της μύτης με κυκλική κίνηση για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε με την ίδια μπατονέτα στο άλλο ρουθούνι.

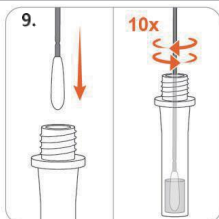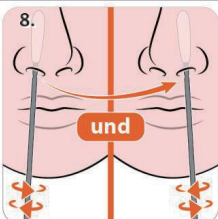


Βυθίστε τα επιχρίσματα σε σωληνάρια εκχύλισης με ρυθμιστικό διάλυμα και περιστρέψτε τα 10 φορές. Αφήστε το να δράσει για μικρό χρονικό διάστημα.

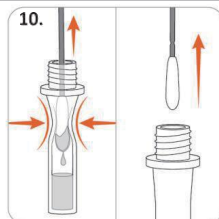


Στη συνέχεια, πιέστε το στύλεο χρησιμοποιώντας το σωληνάριο εκχύλισης. Συλλέξτε το υγρό στο σωληνάριο.

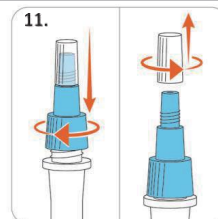


Κλείστε το σωληνάριο εξαγωγής με το καπάκι και ξεβιδώστε το καπάκι του σταγονόμετρου. Βυθίστε τα επιχρίσματα σε σωληνάρια εκχύλισης με ρυθμιστικό διάλυμα και αναδεύστε 10 φορές. Αφήστε το να δράσει για μικρό χρονικό διάστημα.

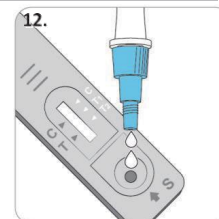

Γυρίστε το σωληνάριο ανάποδα και προσθέστε 2 έως το πολύ 3 σταγόνες της στρογγυλή οπή (S) του δοκιμαστικού κουτιού.

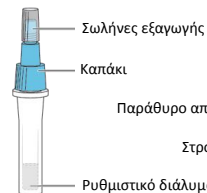

Σωλήνες εξαγωγής

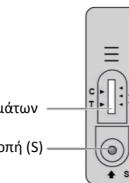

Κασέτα δοκιμής




Μπατονέτα




Αποξηραντικό (απορρίψτε το)

III ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

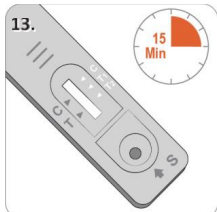

Μην μετακινείτε την κασέτα δοκιμής και διαβάστε το αποτέλεσμα στο παράθυρο αποτελεσμάτων μετά από 15 λεπτά.


C = γραμμή ελέγχου
T = γραμμή δοκιμής

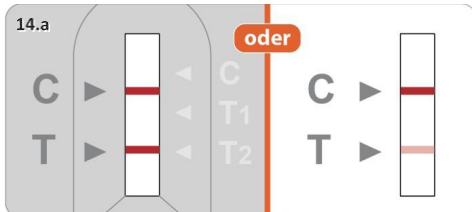

ΘΕΤΙΚΟ


ΘΕΤΙΚΟ

Μπορεί να είναι μεταδοτικές. Απομονώστε τον εαυτό σας και επικοινωνήστε με τον παθολόγο σας ή καλέστε την τηλεφωνική γραμμή : 2105212054

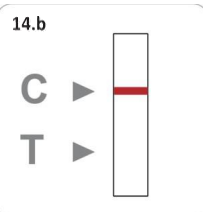

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Δεν είναι πολύ μεταδοτικές, απλώς ακολουθήστε τα μέτρα υγιεινής.

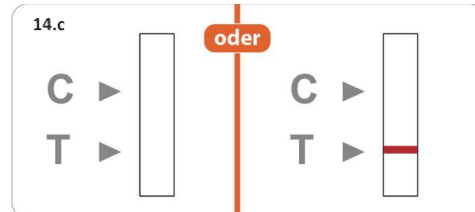


INVALID

INVALID

Επαναλάβετε τη δοκιμή με ένα νέο κιτ δοκιμής.

IV. ΠΡΟΒΛΕΨΗ

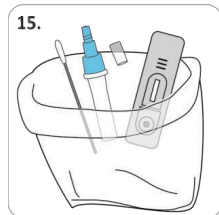

Μετά τη δοκιμή, αποθηκεύστε όλα τα εξαρτήματα σε μια σφραγιζόμενη πλαστική σακούλα και τοποθετήστε τα στο δοχείο απορριμμάτων. Απορρίψτε τα οικιακά ή υπολειμματικά απόβλητα.



Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας.